



Join

アプリケーション操作マニュアル

iOS 版 ver.2.36.0

Index

はじめに

インストール	01
アカウント作成 (アプリ登録の場合)	02
ログイン (施設管理者から事前登録の場合) ..	04

各種設定

パスワード変更	06
パスワードを忘れた場合	07
パスコード設定	08
パスコードを忘れた場合	09
メールアドレス変更	10
ログアウト	12
再インストール後のログイン	13
複数テナントへの所属	14

連絡先

連絡先の検索・追加 (メールアドレス検索) ..	15
連絡先の検索・追加 (テナント検索)	16
グループ作成・連絡先のメンバー追加 ..	17
ユーザーのブロック New	18
ブロックされたユーザーの確認、解除 New	19

ダイレクトチャット

メッセージの送信	20
上部メニュー	21
下部メニュー	22
他のチャットにメッセージを転送	23
特定のメッセージに返信	24
DICOM 画像閲覧・送信	25
チャットのピン留め	27
ピン留めしたチャットの削除	28

グループチャット

グループ情報の確認	29
メッセージの送信	30
上部メニュー	31
下部メニュー	32
他のチャットにメッセージを転送	33
特定のメッセージに返信	34
DICOM 画像閲覧・送信	35
グループ管理機能 Update	37

通知

プッシュ通知から返信	38
通知音の変更	39
「後で通知する」の時間変更	40

DICOM 画像

DICOM ビューワー	41
スプリットビューモード (iPadのみ)	43

症例

症例の登録	44
患者情報・位置情報	45
位置情報のトラッキング	46
患者情報の編集	47

プロトコル

プロトコルの送信	48
タイムスタンプの閲覧	50

音声通話 / ビデオ通話

<u>ユーザーから通話開始</u>	51
<u>ダイレクトチャットから通話開始</u>	52
<u>通話履歴から通話開始</u>	53
<u>着信画面</u>	54
<u>音声通話画面</u>	55
<u>ビデオ通話画面</u>	56

グループ通話 音声 / ビデオ通話

<u>既存グループから音声通話開始</u>	57
<u>「通話」から音声通話開始</u>	58
<u>発信画面</u>	59
<u>音声通話画面</u>	60
<u>チャットグループからビデオ通話開始</u>	61
<u>「通話」からビデオ通話開始</u>	62
<u>ビデオ通話画面</u>	63
<u>ビデオ通話中の画面共有</u>	64
<u>通話中のメンバー追加</u>	65
<u>通話中の参加リクエスト</u>	66
<u>通話履歴</u>	67

音声メッセージ

<u>録音・チャットへの貼り付け</u>	68
<u>録音のキャンセル</u>	69
<u>音声メッセージの再生</u>	70

写真 / 動画

<u>写真を撮影して送信</u>	71
<u>撮影直後に編集 (トリミング・回転)</u>	72
<u>撮影直後に編集 (テキスト・ブラシ)</u>	73
<u>送信した写真を編集・再送信</u>	74
<u>動画を撮影して送信</u>	75
<u>写真・動画ファイルの送信</u>	76
<u>送信品質の変更</u>	77

ファイル共有

<u>PDFファイルの共有</u>	78
<u>画像ファイルの共有</u>	80

はじめに インストール

iOS 版 ver.2.36.0



Join



アプリ登録の場合
「[アカウント作成](#)」へ


施設管理者から
事前登録の場合
「[ログイン](#)」へ

※ QR コードが読み取れない方は、
App Storeで「Join Allm」と検索して
いただき、Join アプリをインストールしてください。

※ iOS 15 以上の OS 端末でご利用いただけます。
該当しない場合は、お持ちの端末の OS アップデートをお願いします。




※パスワードは、半角英字と半角数字を
組み合わせた13文字以上を入力してください。

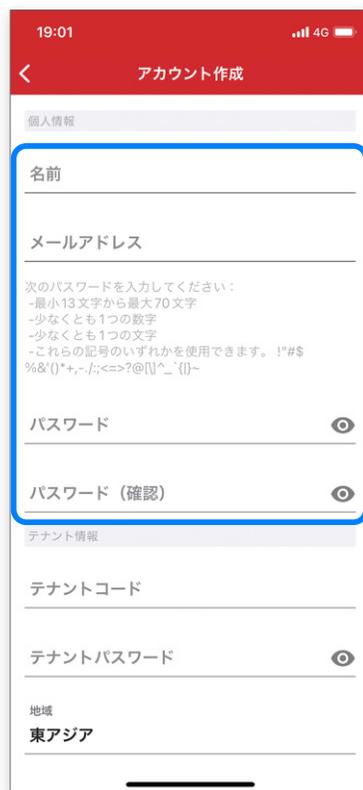

※テナントコード・パスワードが不明の場合は、
貴テナント管理者様までお問い合わせください。



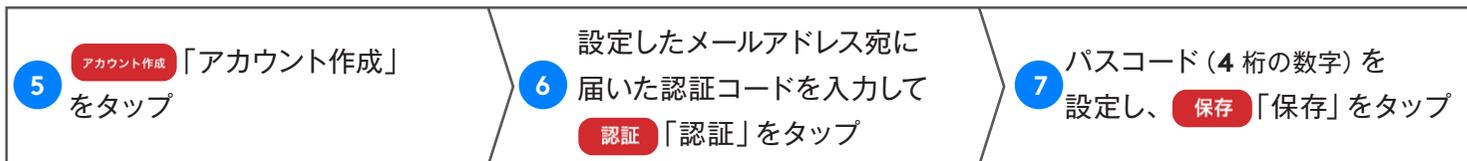

※認証コードが届かない場合は、「コードを再送信」から再送してください。再送信しても届かない場合は前の画面に戻り、入力したメールアドレスに誤りがないかご確認ください。


※メールが届かない場合は、迷惑メールフィルターにより、迷惑メールフォルダに振り分けられる場合があります。またドメイン拒否してる場合もありますので、メールソフトの設定をご確認ください。



アカウント作成完了
(ログイン状態になります)

※パスコードとは、アプリのロック解除に必要な4桁の数字です。



アプリを起動し、パスワードを設定します。

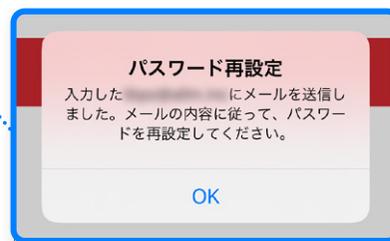


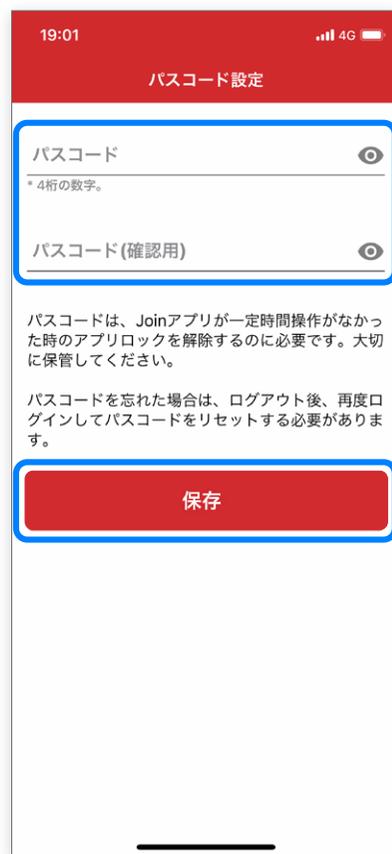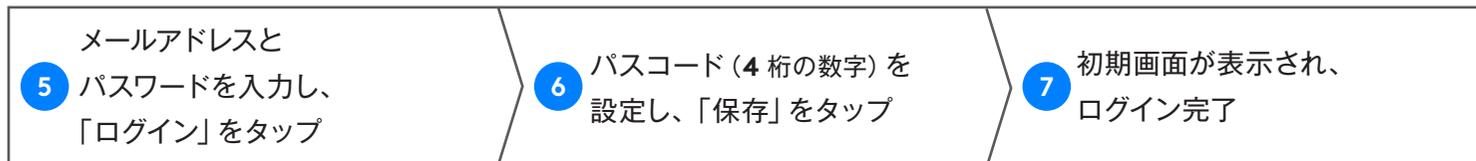

※パスコードとは、アプリのロック解除に必要な4桁の数字です。



アカウントのパスワードを変更することができます。

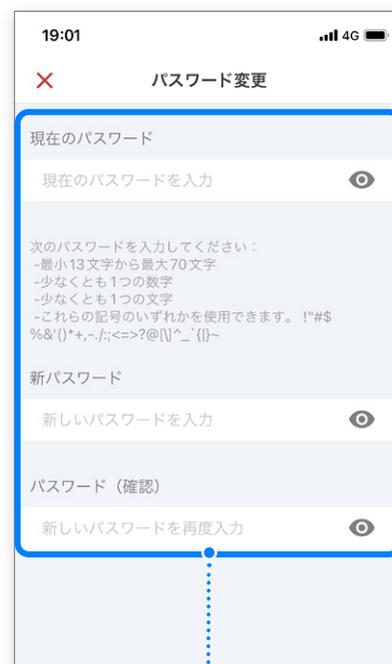


パスワードは、半角英字と半角数字を組み合わせた13文字以上を入力してください。



パスワードを忘れた場合






パスワードを忘れてしまった場合には、リセットして新しいパスワードを設定することができます。

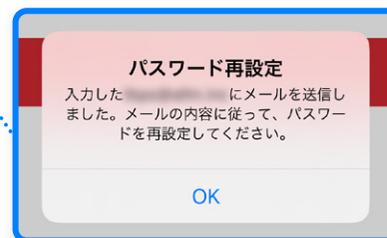

設定完了後、アプリに戻りログインしてください。



Join は一定時間操作しない状態が続くと、セキュリティのためにアプリをロックします。
パスコードはロック解除の際に使用します。

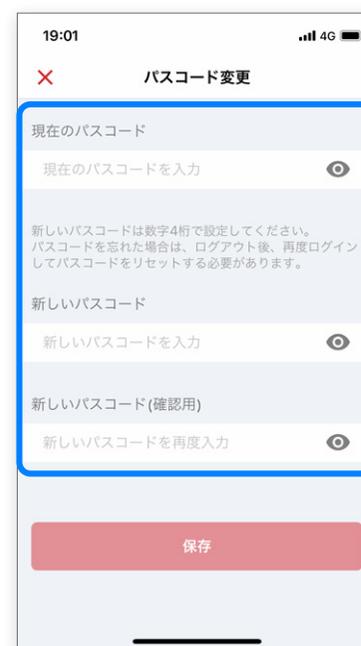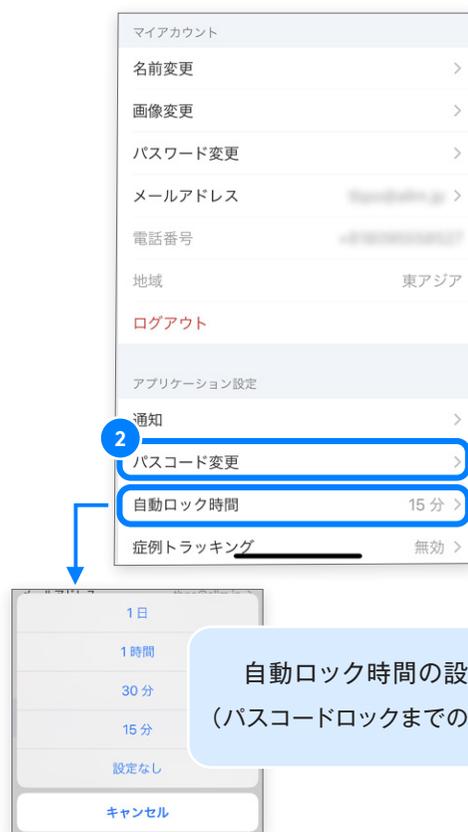
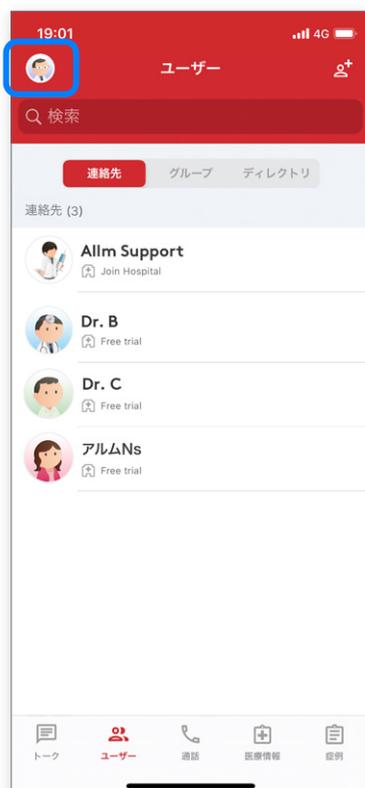


※セッション時間が施設管理者によって設定されている場合は、
アカウントごとの設定変更はできません。

パスコードを忘れた場合




パスコードを忘れてしまった場合は、一度ログアウトしてパスコードを再設定してください。

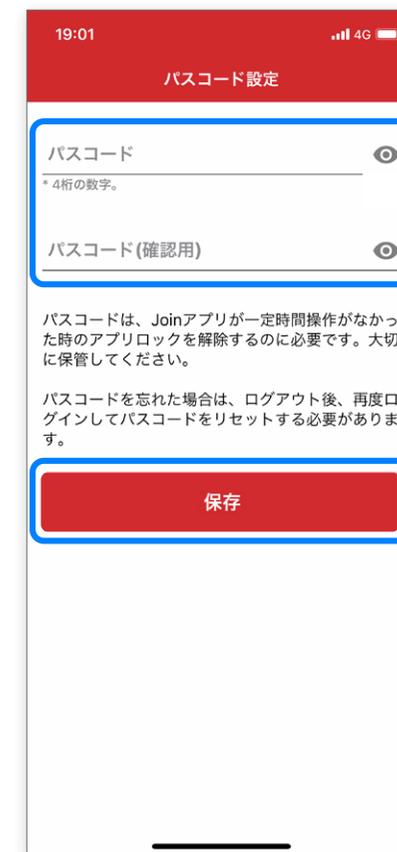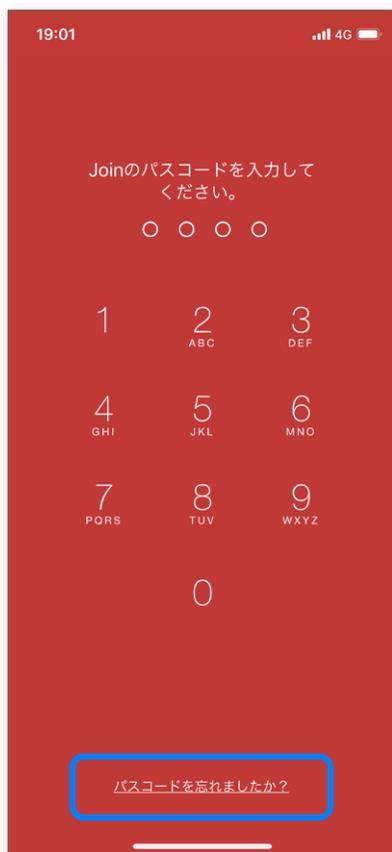




アカウントのメールアドレスを変更することができます。

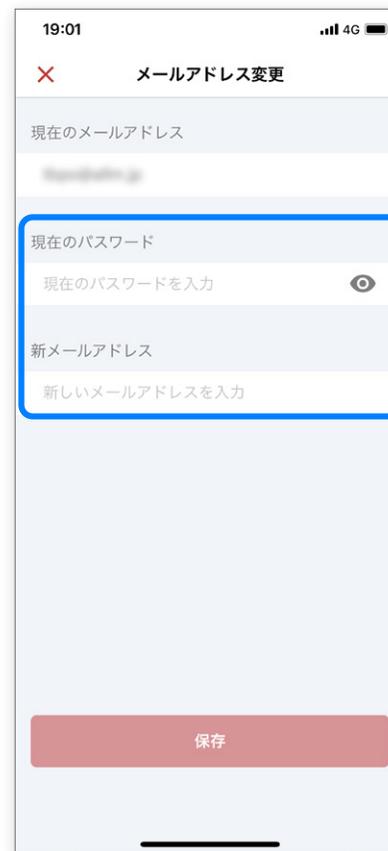



5 メールに届いた認証コードを入力して、**認証**「認証」をタップ

6 変更完了

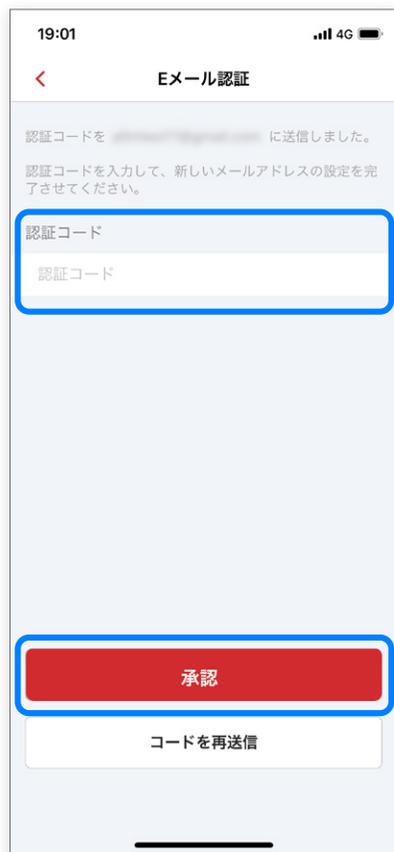

※認証コードは発行後10分間有効です。
無効の場合は、再度メールアドレス変更手続きを行ってください。

「メールアドレスが正常に変更されました」の表示



必要に応じてユーザー自身でログアウトすることができます。




※下記条件のいずれかに該当する場合、ユーザーは自動的にログアウトされます。利用時にはメールアドレス、パスワードを入力してログインしてください。

ログアウト

- ・端末で **90 日間**アプリを使用しなかった
- ・別の端末でパスワードを変更した
- ・Join Web 版の設定画面上で、すべてのセッションのログアウトを実行した
- ・アカウントが所属施設の管理者によって削除された



端末の変更などで Join を再インストールした際は、「アカウント作成」で登録したメールアドレスとパスワードでログインしてください。

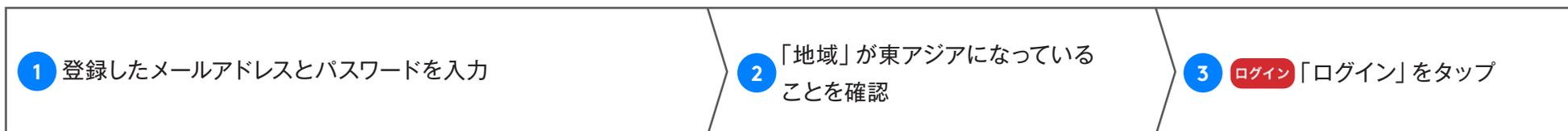

既存アカウントをお持ちの場合はアカウント作成しないでください。

再登録となり、今までのアプリのグループ設定・チャットログが引き継がれません。



※異なる地域になっている場合は、手動で「東アジア」に設定してください。



※ログインすると、連絡先設定、グループチャットが引き継がれます。





※1対1のダイレクトチャットは引き継がれません。

※注意※

ログインに5回失敗すると、セキュリティーロックがかかります。




〈Index〉パスワードリセットを行うか、施設の Join 管理者に連絡し、管理画面上でロック解除を実施してください。

複数テナントへの所属

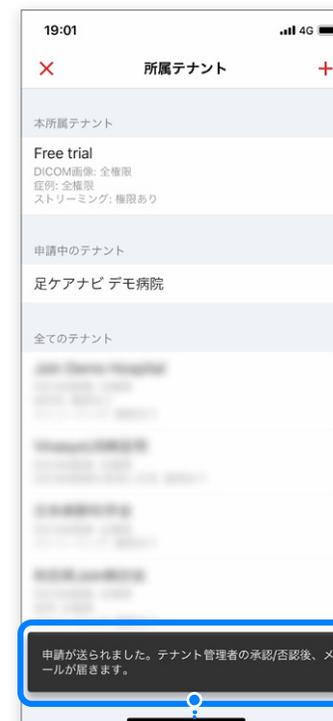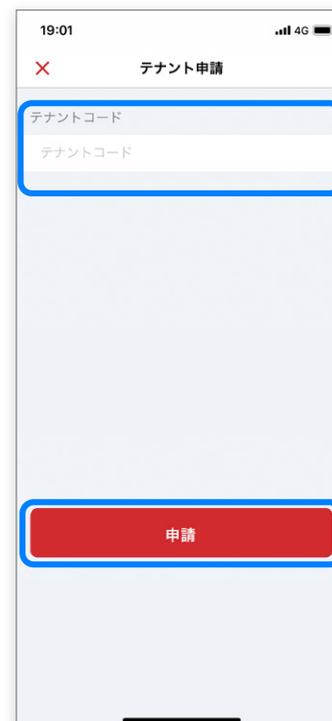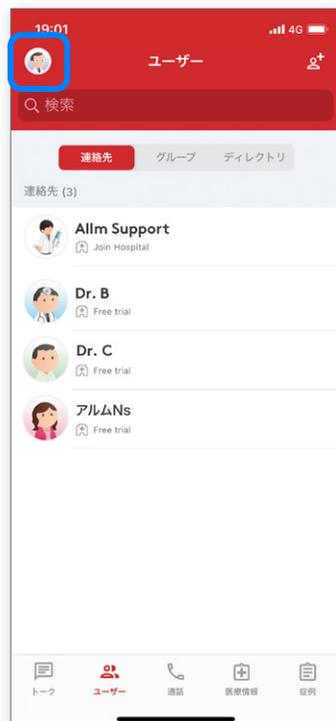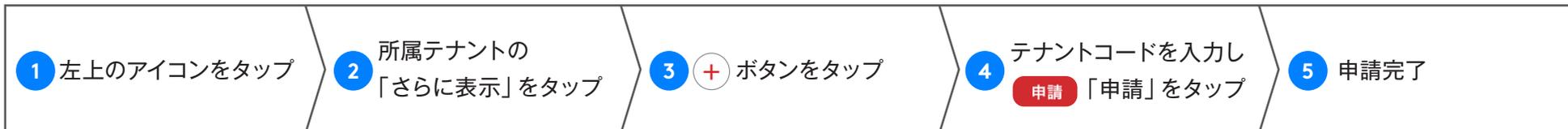

テナント管理者の承認 / 否認後、メールが届きます。




※参加申請を行ってから実際に反映されるまで、時間がかかる場合があります。設定画面にある所属テナント表示の更新には、アプリの再起動が必要です。

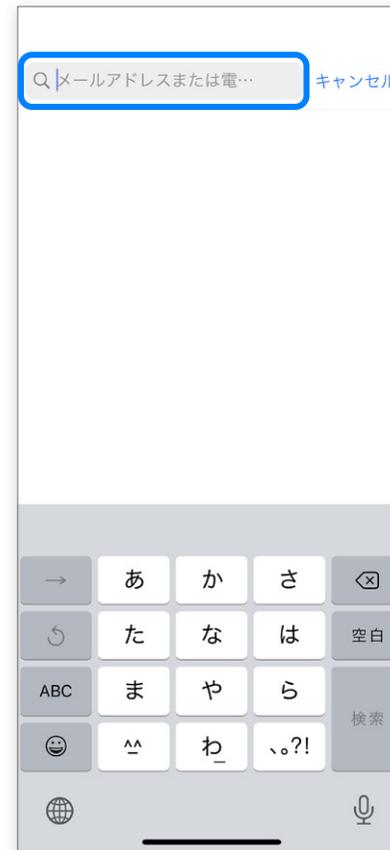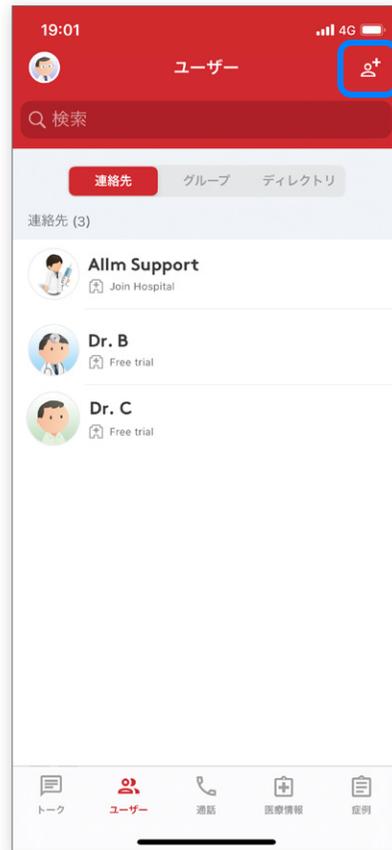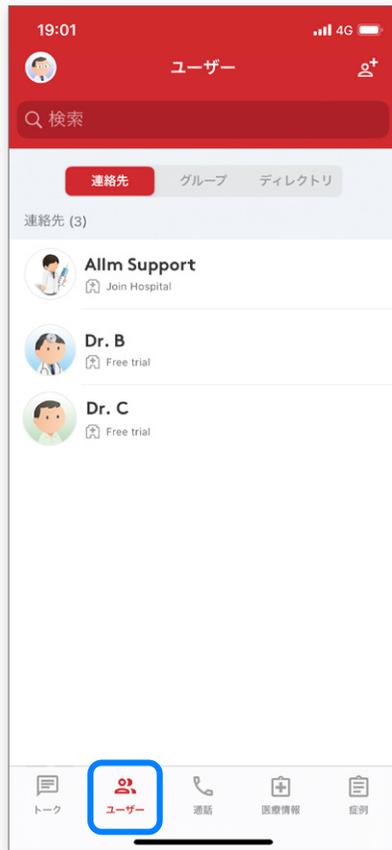

※メールアドレスはアカウント名と .jp などのドメインを含む全ての文字列にて検索が可能となります。




所属しているテナントのユーザーを検索し、連絡先に追加できます。

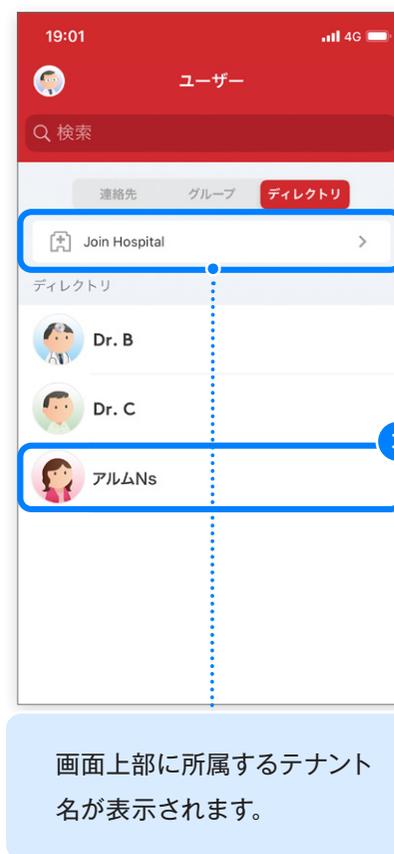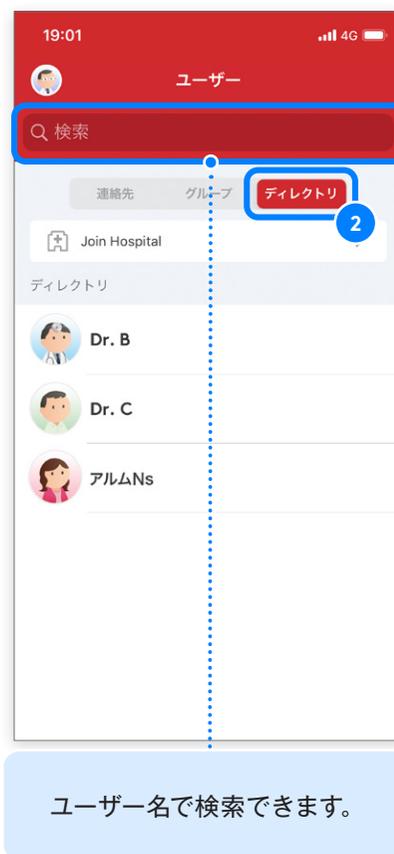
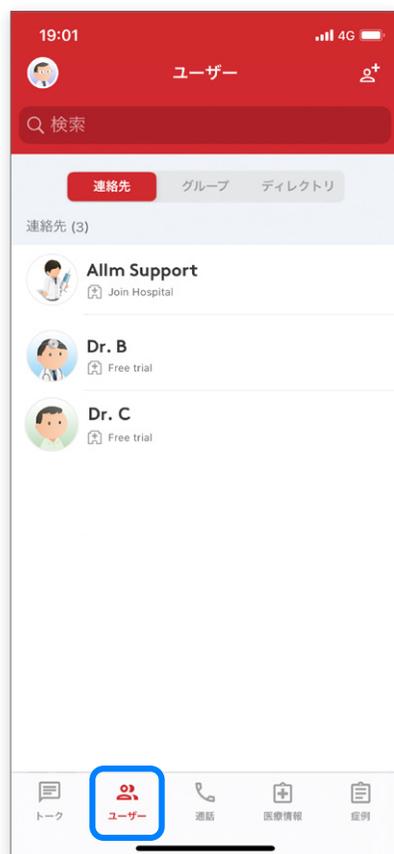


※ユーザー情報の詳細を確認することもできます。

グループ作成・連絡先のメンバー追加

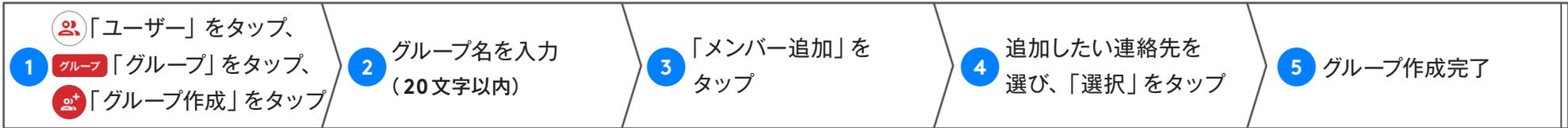



グループ画像が
設定できます。

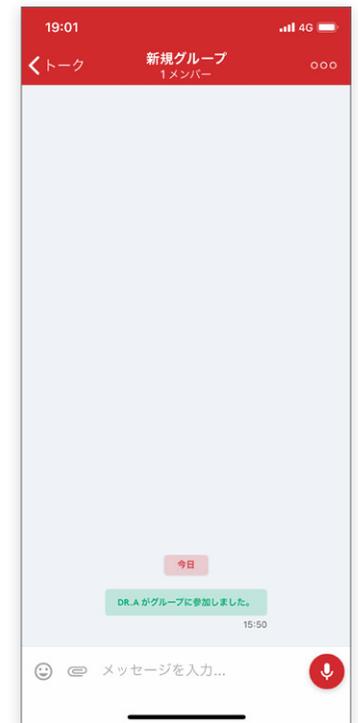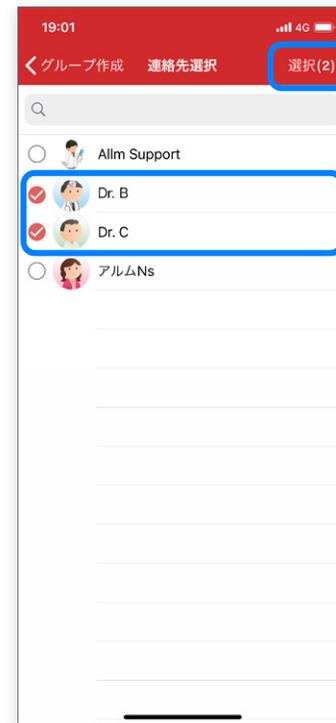

※グループは招待した連絡先メンバーで構成され、
複数のメンバーと同時に通信する「グループチャット」が可能です。






ユーザーをブロックすると、チャットリスト / 連絡先から削除されます。

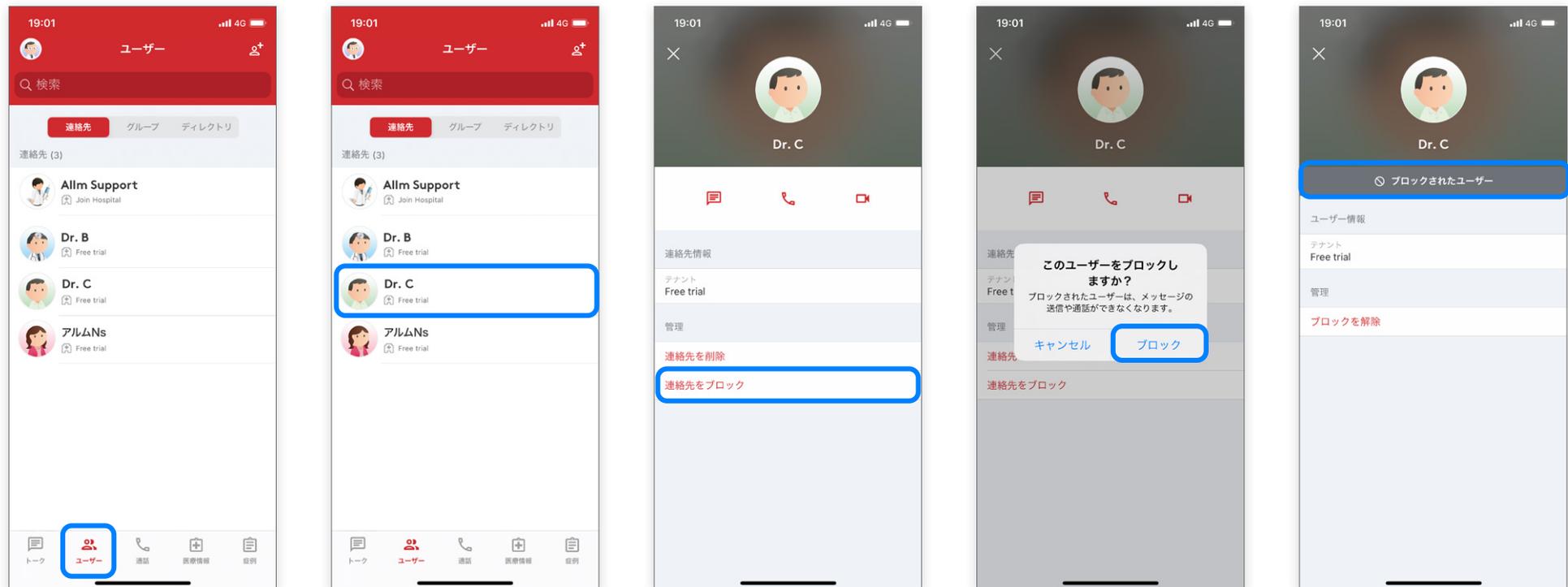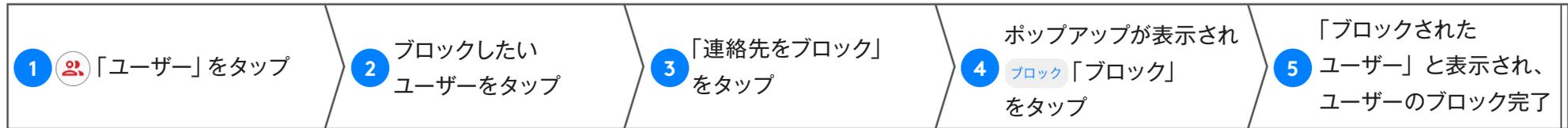




ブロックしたユーザーからのアクションについて

- ・ダイレクトチャットのメッセージは通知されません
※他のチャットから転送されたメッセージの場合も同様です。
 - ・グループチャットのメッセージは通知されます。
 - ・ダイレクト通話 **or** 複数人の通話の場合：着信は通知されません。
通話に参加しないかぎりは通話履歴に表示されません。
 - ・グループ通話の場合：着信は通知されません。
ただしチャットや通話履歴には表示されるのでそこから通話に参加ができます。
- ※複数人の通話：連絡先一覧に登録しているユーザーを3人以上選択して行う通話のことです。

ブロックされたユーザーの確認、解除 New

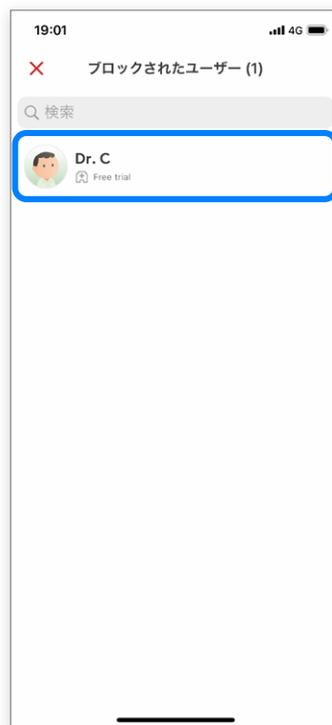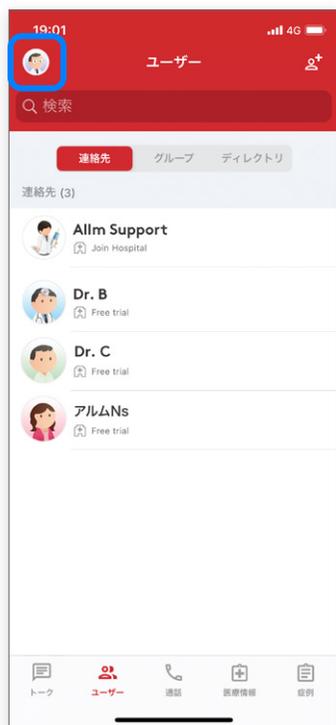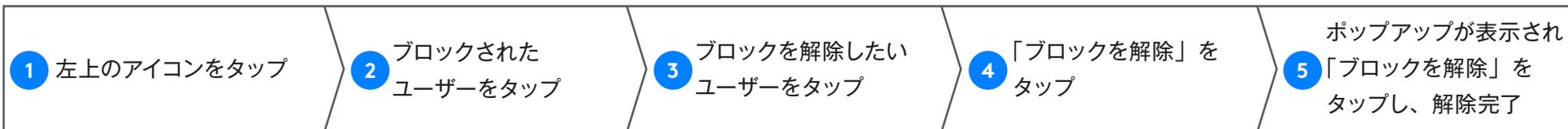

※ブロック解除後も、ブロック以前の会話の履歴は残ります。

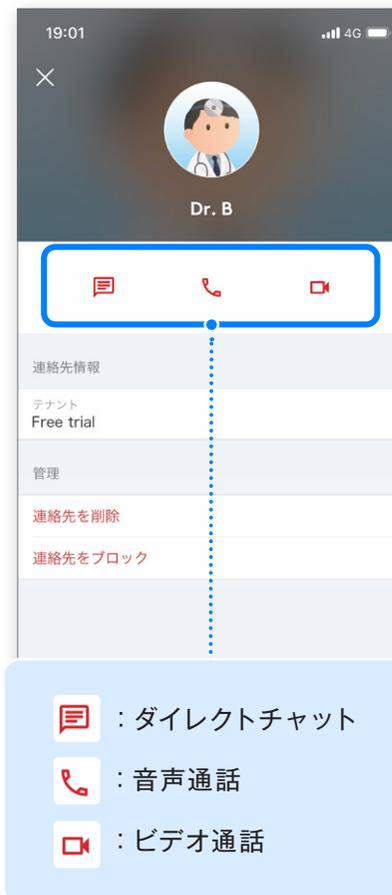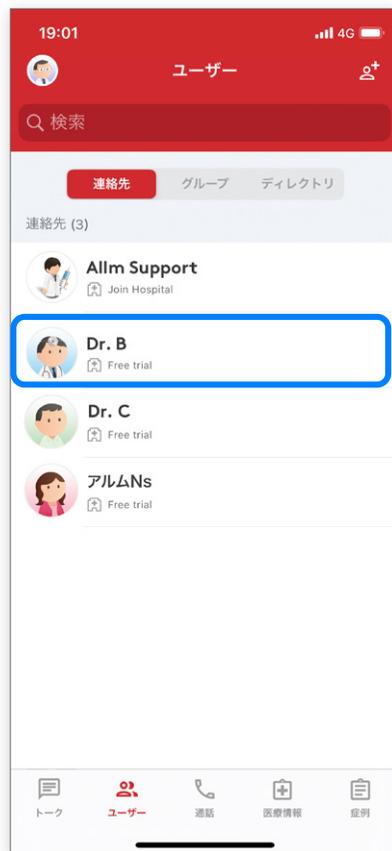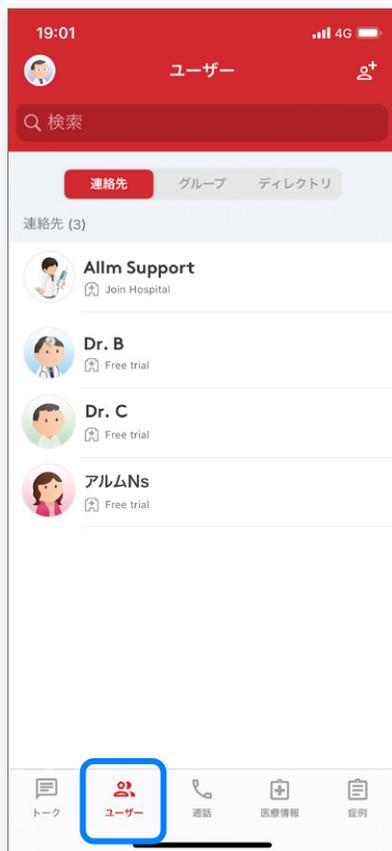




通話ボタン

ビデオ通話ボタン

それぞれタップすると、
直接通話画面へ切り替わります。

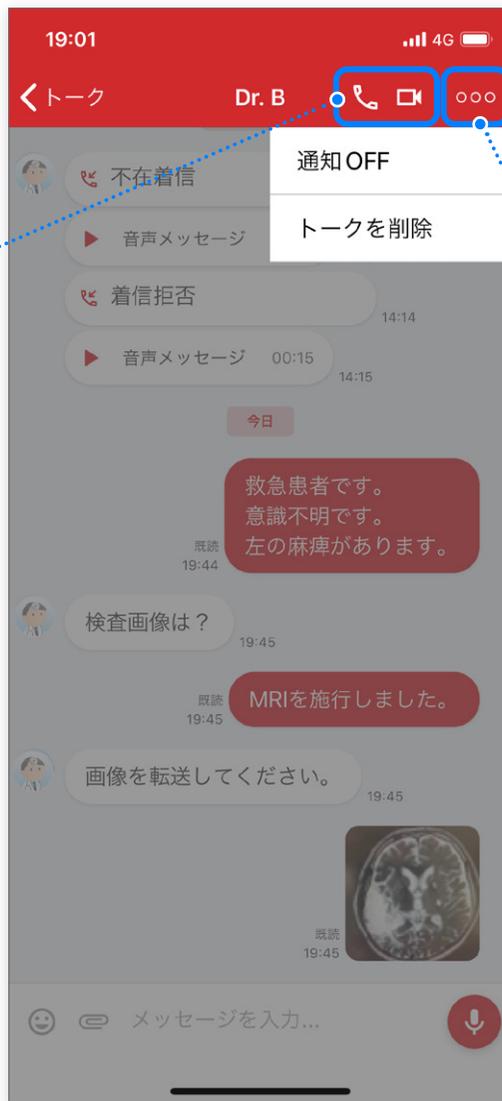

メニューボタン

タップすると「通知 OFF」「退出」が設定できます。

通知 OFF

通知 OFF のユーザーの
場合、トーク一覧に
🔕 マークが表示されます。



トークを削除

トークを削除すると一覧から
そのチャットが消えますが、
連絡先一覧からは消えません。





画面下部のボタンでは様々な情報を共有することができます。

一番下へスクロール

メッセージを入力

音声メッセージを録音

スタンプを表示

をタップで選択肢が出現

写真・動画を選択

写真・動画を撮影

DICOM 画像

最下段の小さなスタンプをタップで、スタンプの種類を変更できます。

緊急紹介です

緊急搬送あり

緊急搬送なし

救急車出発しました

搬送中

搬送先は到着

向かって移動中

院内にいます

トークに送信

メディア

カメラ

DICOM 画像


処方/検体検査情報

写真・動画を撮影

5つまで同時選択・送信が可能



症例・通話履歴・処方 / 検体検査情報は転送できませんので、ご注意ください。

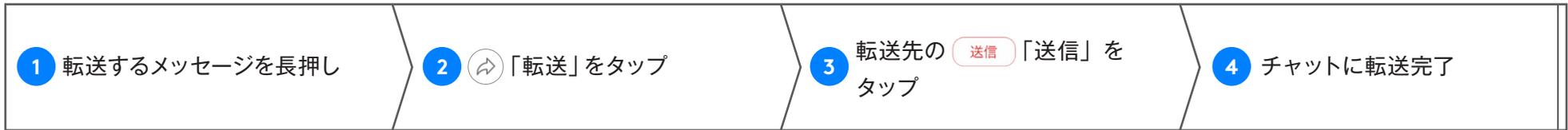

長押し



転送先は1度に最大で5つまで選択可能です。









1 返信するメッセージを長押し

2 「返信」をタップ

3 返信メッセージを入力し、
「送信」をタップ

4 送信完了


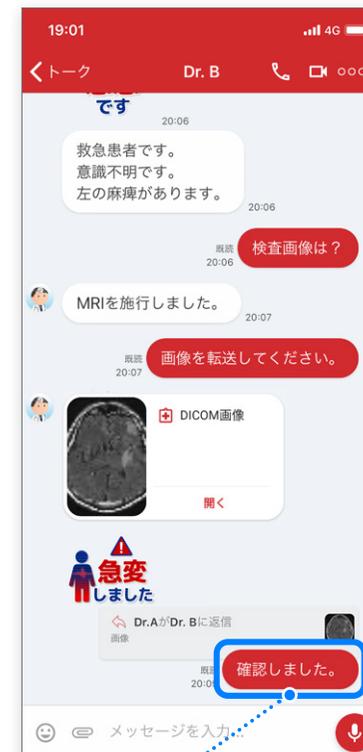
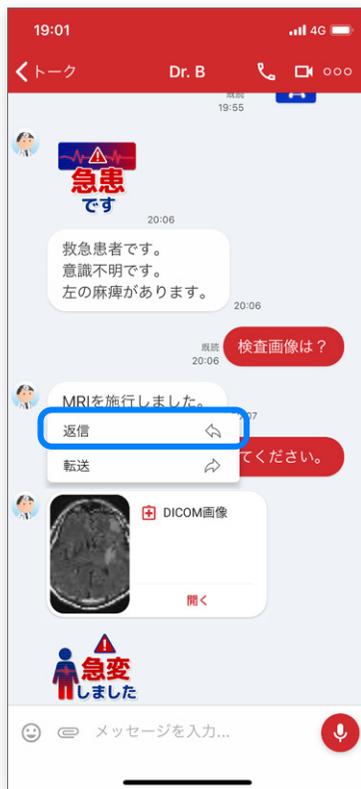


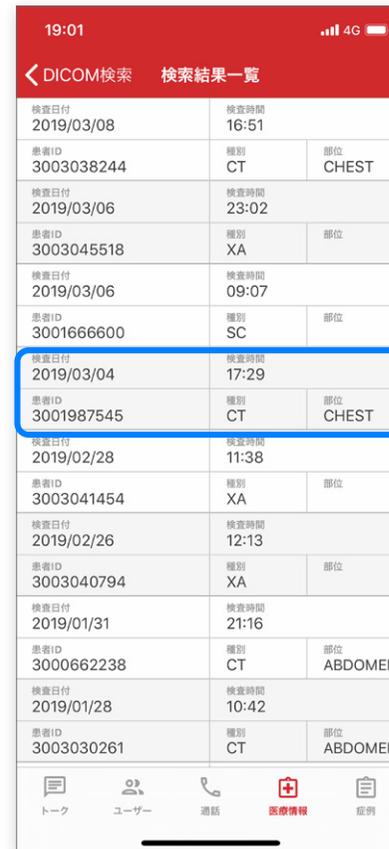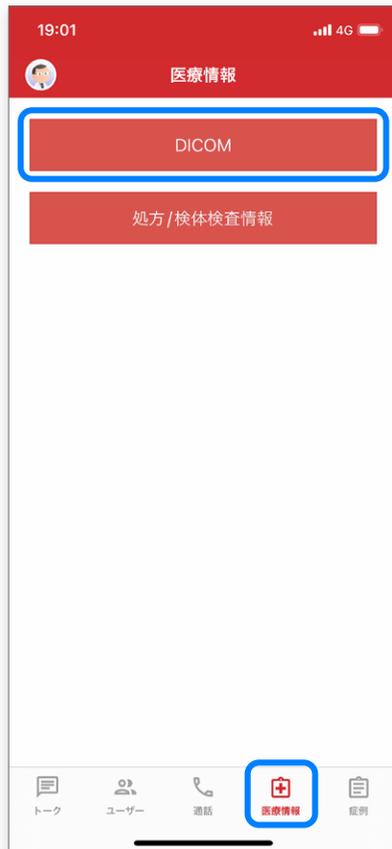




※ DICOM 画像の閲覧について

- ・ 同一テナントに所属しているユーザー間であれば、貼り付けられた DICOM 画像を閲覧できます。別テナントに所属するユーザー間の場合、管理者が閲覧権限を許可に設定しなければ閲覧はできません。
- ・ 閲覧権限が無い場合はエラーメッセージが表示されます。
- ・ テナントの定める閲覧期限が過ぎた DICOM 画像は閲覧できません。その場合、サムネイルが表示されない場合があります。

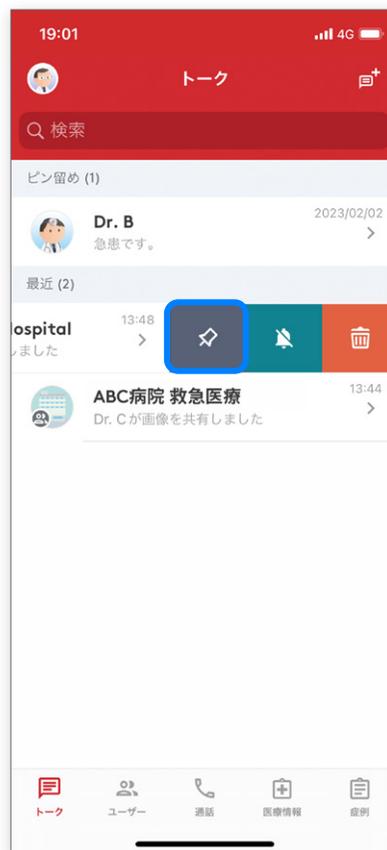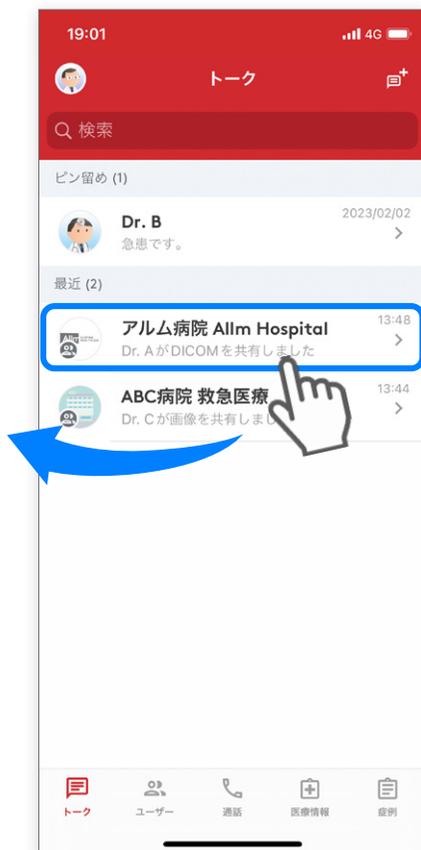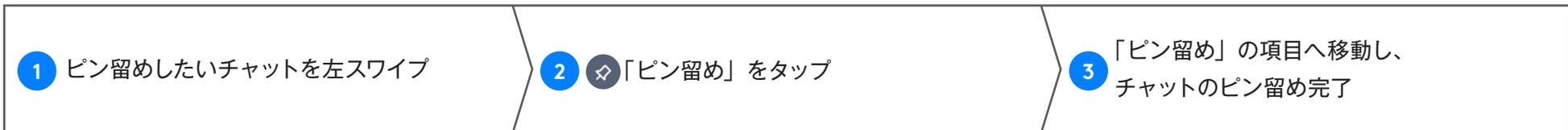

ピン留めされたチャットは、チャットリスト上部へ移動します。


ピン留めしたチャットの削除

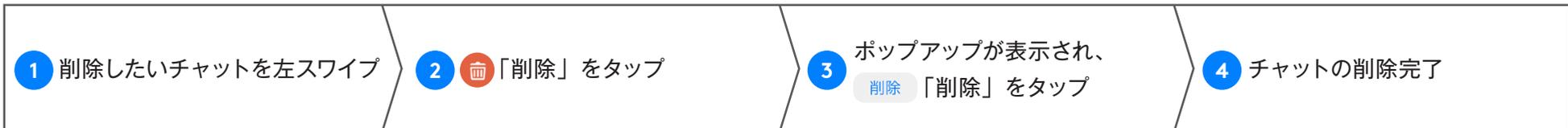

※チャットを削除しても連絡先、またグループは連絡先 / グループリストからは削除されません。



リストの中から好みの通知音に変更することができます。

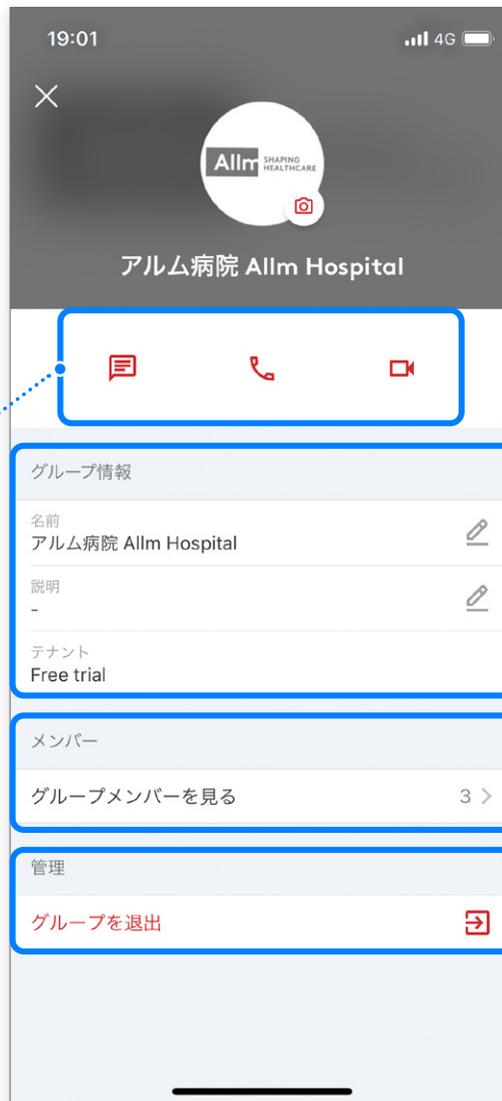

 : ダイレクトチャット
 : グループ音声通話
 : グループビデオ通話

グループ情報
 グループ名・グループ説明・テナントの確認、編集等ができます

メンバー
 グループメンバーとグループ人数を確認することができます。


グループを退出
 グループから退出します。



1 「ユーザー」をタップ、
 「グループ」をタップ、
メッセージを送りたいグループをタップ

2 「グループチャット」をタップ

3 メッセージを入力し、
 「送信」をタップして送信完了

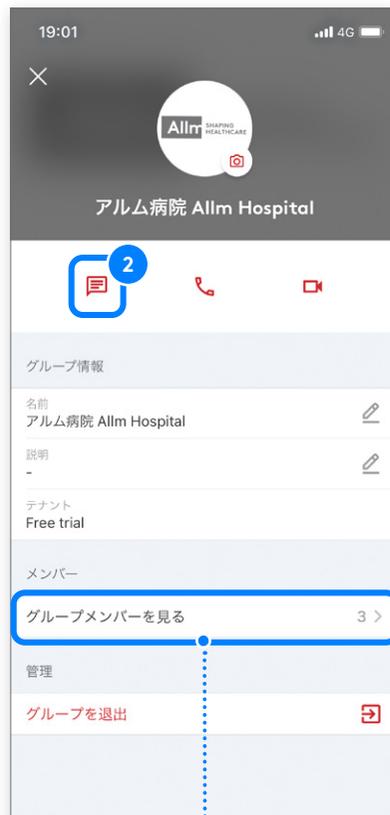

グループに所属している
メンバーの一覧が表示されます。



アバターをタップすると…



連絡先は「連絡先詳細画面」が
表示されます。



連絡先リストにないメンバーは
「連絡先追加画面」が表示され、
連絡先に追加できます。



編集

グループ名・グループ画像の変更、メンバーの追加・削除等ができます。

招待

連絡先メンバーをグループに招待できます。

連絡先に を付け、「選択」をタップ



通知 OFF

グループごとに通知 ON/OFF が設定できます。

通知 OFF のユーザーの場合、トーク一覧に  マークが表示されます。



タップしてメニューを表示

既存グループから音声通話開始

チャットグループからビデオ通話開始

※各ページにて詳細をご確認ください

グループサイト

管理機能でグループサイトが設定されている場合にのみ表示されます。



タップして動画再生



サイトへのリンクが設定されている場合は、ブラウザでリンク先のサイトを表示します。

退出 選択中のグループから退出します。



画面下部のボタンでは様々な情報を共有することができます。

一番下へスクロール

メッセージを入力

音声メッセージを録音

スタンプを表示

をタップで選択肢が出現

写真・動画を選択

写真・動画を撮影

DICOM 画像

プロトコル

患者

患者		
救急種別	心疾患	最終更新日時
患者ID	00002	性別 年齢
テナント	Free trial	71
救急種別	脳卒中	最終更新日時
患者ID	00001	性別 年齢
テナント	Free trial	64

最下段の小さなスタンプをタップで、スタンプの種類を変更できます。

他のチャットにメッセージを転送



症例・通話履歴・処方 / 検体検査情報は転送できませんので、ご注意ください。







1 返信するメッセージを長押し

2 「返信」をタップ

3 返信メッセージを入力し、「送信」をタップ

4 返信完了

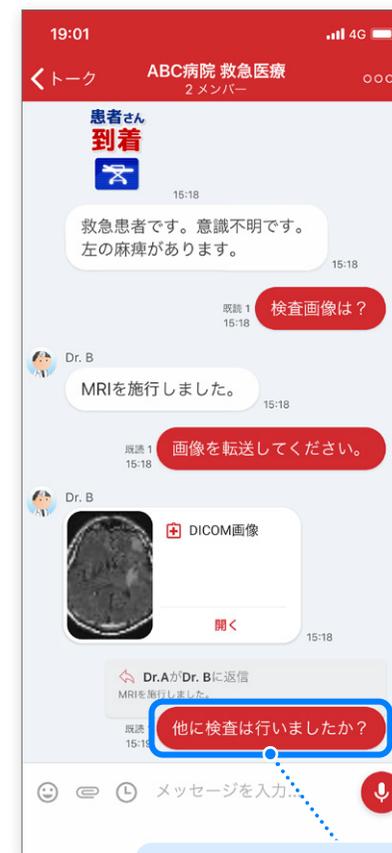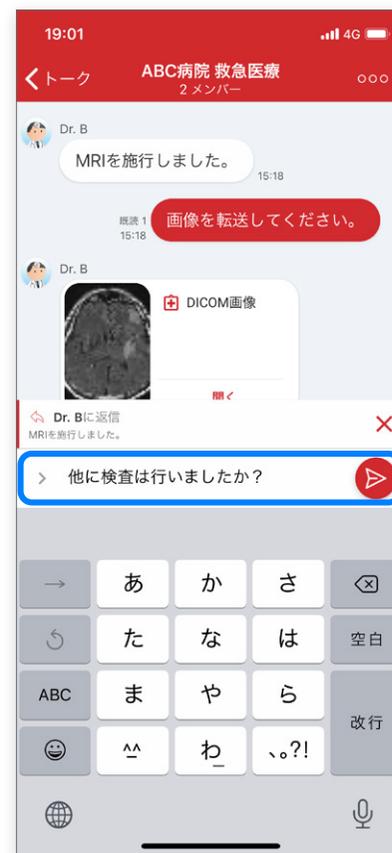

タップすると返信元のメッセージを確認できます。





Next >

1 DICOM 「DICOM」をタップ

2 検索 「検索」をタップ

3 検査を選択してタップ

4 貼り付け 「貼り付け」をタップ

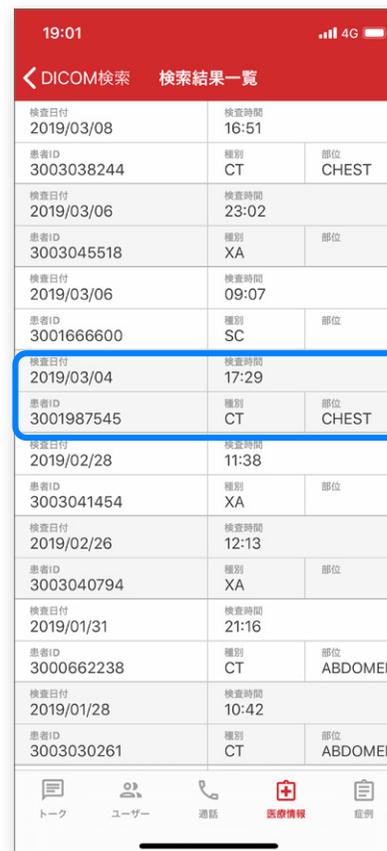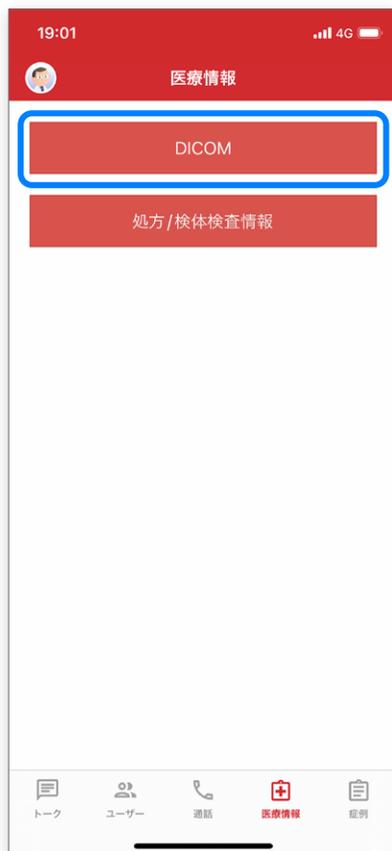



※ DICOM 画像の閲覧について


- ・ 同一テナントに所属しているユーザー間であれば、貼り付けられた DICOM 画像を閲覧できます。別テナントに所属するユーザー間の場合、管理者が閲覧権限を許可に設定しなければ閲覧はできません。
- ・ 閲覧権限が無い場合はエラーメッセージが表示されます。
- ・ テナントの定める閲覧期限が過ぎた DICOM 画像は閲覧できません。その場合、サムネイルが表示されない場合があります。



グループの管理者は、グループの設定やメンバーの管理を行うことができます。

グループ設定一覧	管理者	メンバー
メンバーの招待	✓	
メンバーの削除	✓	
情報の編集 (グループ名、アイコン、説明文)	✓	
管理者への設定	✓	
管理者権限の削除	✓	
チャットの利用	✓	✓
外部リンク、ストリーミングの利用	✓	✓
ライブビューの利用	✓	✓
症例の閲覧、編集	✓	✓
症例の設定	✓	

※グループ管理者を設定しないことも可能です。その場合は管理コンソール画面での作業が必要です。

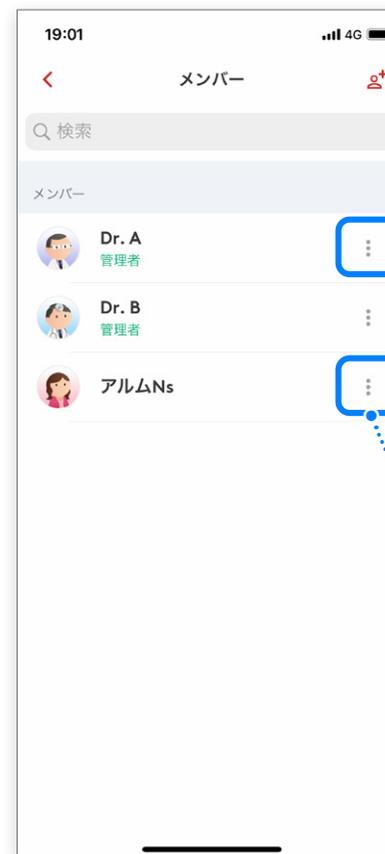

管理者は他の管理者の権限を設定できません。



管理者はメンバーを管理者に設定すること、またメンバーの削除をすることができます。





1 プッシュ通知を長押し

2 「返信」をタップ

3 チャット画面で通知内容を確認し、
メッセージを返信



プッシュ通知を長押しすると、「返信」と「後で通知」のどちらかを選択できます。





「後で通知」をタップすると、選択した時間経過後に再度通知されます。



※ FaceID 搭載の機種 (iPhoneX 以降のモデル) は長押し後、指を離すと「返信」と「後で通知」のどちらかを選択できます。



リストの中から好みの通知音に変更することができます。

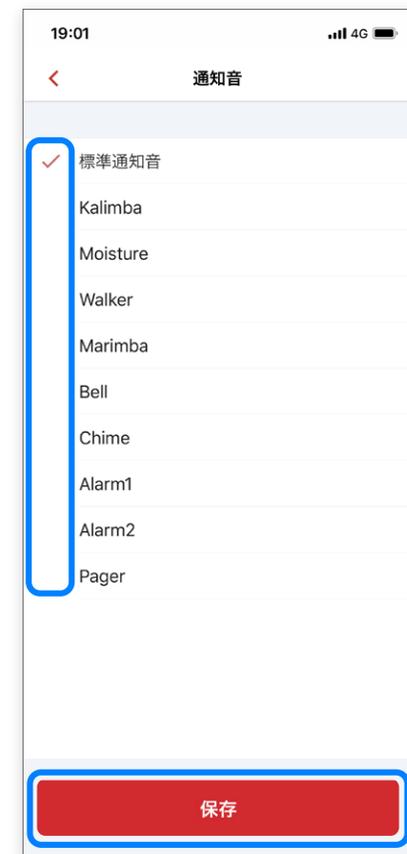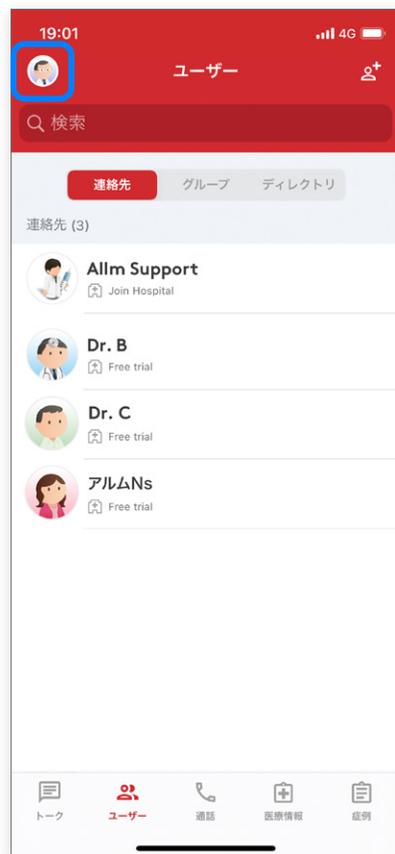


※アプリ全体の通知オフは下記の手順により設定できます。

iOS 本体の「設定」> Join アプリを選択 > 通知 > 通知を許可を「オフ」

「後で通知する」の時間変更



プッシュ通知で「後で通知する」が選択された際の、通知時間を変更することができます。

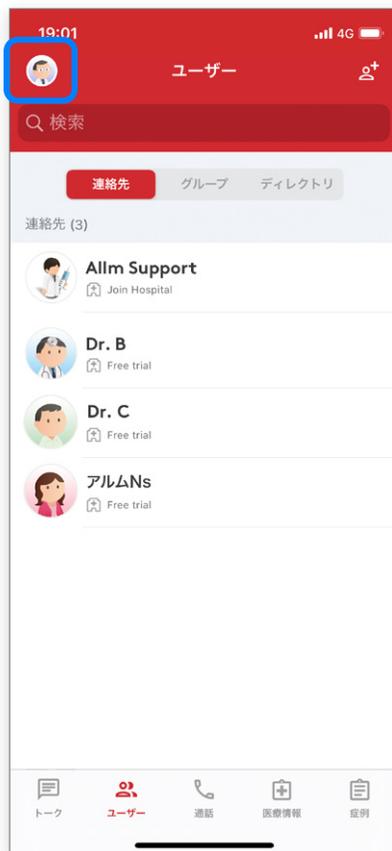

※選択した通知時間は、Joinで受け取る通知の全てに適用され、グループ別に設定することはできません。





Next >

1 「医療情報」をタップし、
DICOM 「DICOM」をタップ

2 検索 「検索」をタップ

3 検査を選択してタップ

4 貼り付け 「貼り付け」をタップ

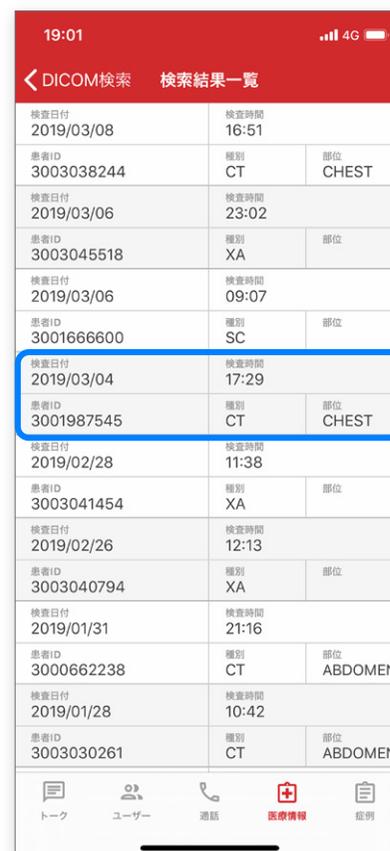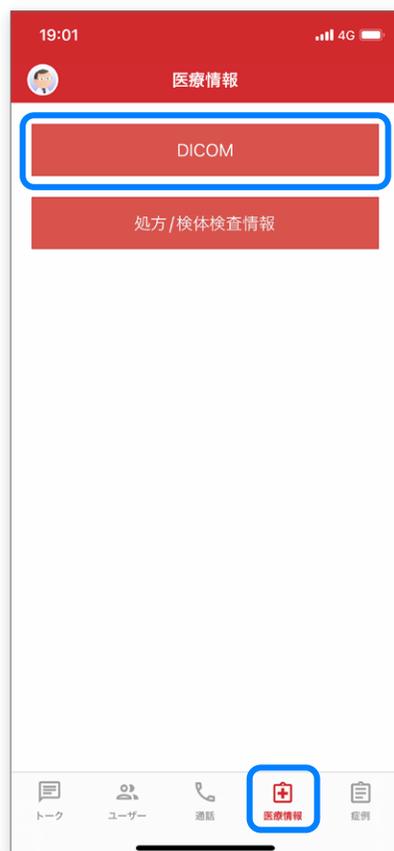




5 送信先を選択してタップ

6 チャットに貼り付けられた
画像をタップ

7 DICOM 画像を閲覧

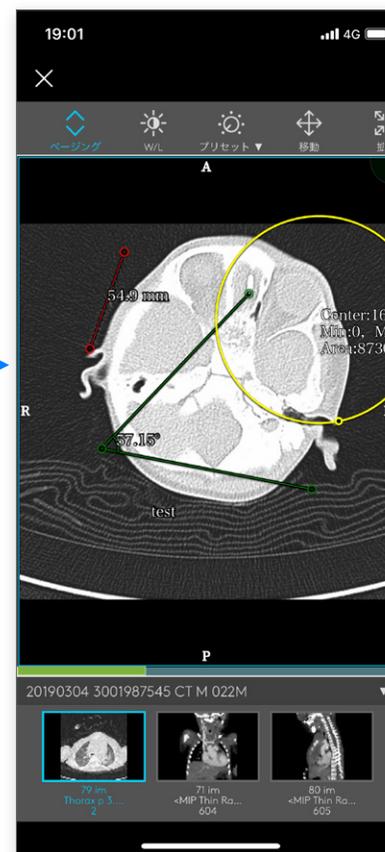

手順 3 の「プレビュー」
からもプレビュー画面の
確認が可能です。

※ DICOM 画像の閲覧について

- ・ 同じテナントに所属しているユーザー間であれば、貼り付けられた DICOM 画像を閲覧できます。
別テナントに所属するユーザー間の場合、管理者が閲覧権限を許可に設定しなければ閲覧はできません。
- ・ 閲覧権限が無い場合はエラーメッセージが表示されます。
- ・ テナントの定める閲覧期限が過ぎた DICOM 画像は閲覧できません。その場合、サムネイルが表示されない場合があります。





DICOM 画像閲覧時に端末を横向きにするすることで、DICOM 画像とチャットが両方表示されるスプリットビューモードを使用できます。

1 貼り付けられた画像をタップして
DICOM 画像を閲覧

2 閲覧時に端末を 90 度傾ける

3 スプリットビューモード

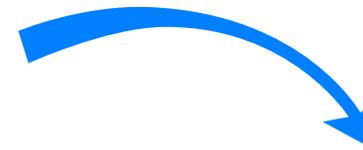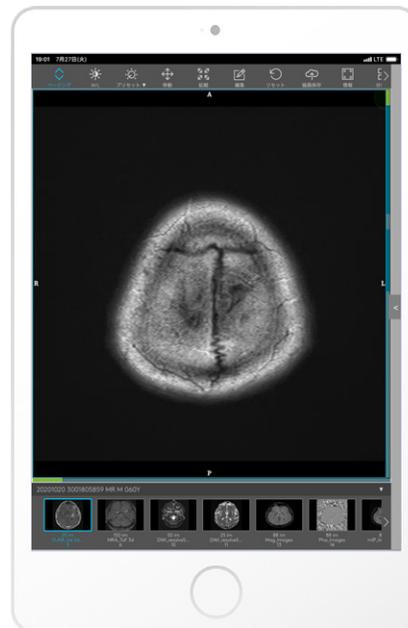

※この機能は iPad のみ対応しています。




1 「症例」をタップし、
+ ボタンをタップ

2 各種情報を入力し、
次へ 「次へ」をタップ


3 グループを選択

4 登録完了

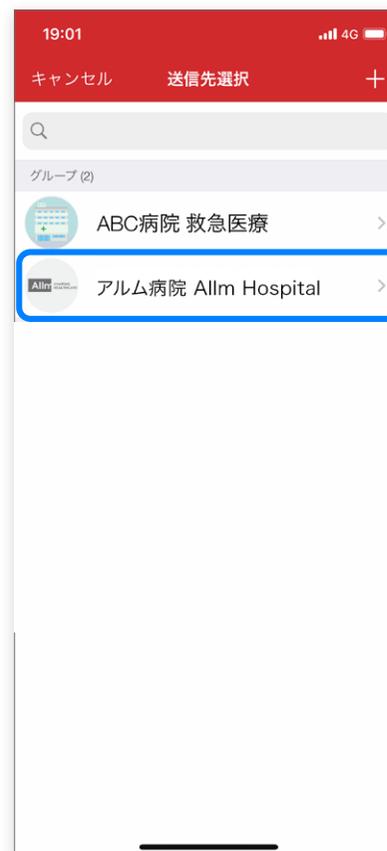


登録した情報が、
選択したグループの
チャットに送信されます。

※登録権限が無い場合は、「+」ボタンは表示されません。

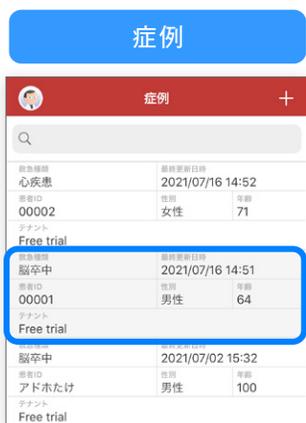

患者が登録されたグループのチャットを開くことができます。

※患者情報の閲覧権限が無い場合はエラーメッセージが表示されます。

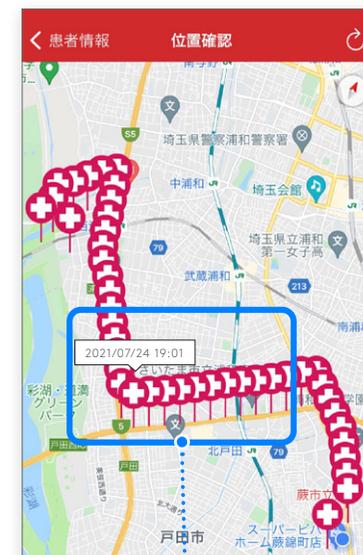

日時が表示され、何時何分にもその位置を通過したのか確認できます。

※位置情報が送信される条件について
以下のどれか1つが当てはまったタイミングで地図にピンが追加されます。
・200m 移動 ・8 秒間移動 ・アイドル時間が5分経過



トラッキング開始

「トラッキング開始」をタップして追跡開始

19:01 4G

< Hospital A ER 患者情報 編集

テナント
Join Demo Hospital

患者ID
1234

性別 男性	年齢 58
体重	患者種類 直接来院
NIHSS 22	救急種類 脳卒中

グループ
Hospital A ER

発症時間
8月 1, 9:21

備考

トラッキング開始 位置確認

タイムスタンプ DICOM

トラッキング終了

「トラッキング終了」をタップして追跡終了

19:01 4G

< Hospital A ER 患者情報 編集

テナント
Join Demo Hospital

患者ID
1234

性別 男性	年齢 58
体重	患者種類 直接来院
NIHSS 22	救急種類 脳卒中

グループ
Hospital A ER

発症時間
8月 1, 9:21

備考

トラッキング終了 位置確認

タイムスタンプ DICOM

位置情報の追跡中は、
アプリの画面上部に
点滅矢印が表示されます。

※トラッキングはデフォルトでは機能が無効になっているため、
設定画面で「症例トラッキング」の設定を有効にする必要があります。



- 1 **編集** 「編集」をタップ
- 2 患者情報を編集し、**保存** 「保存」をタップ
- 3 編集完了

19:01 4G

患者情報 **編集**

テナント
Free trial

患者ID
00003

性別 男性	年齢 65
体重 74	患者種類 転院搬送
NIHSS	救急種類 脳卒中

グループ
ABC病院 救急医療

発症時間
2021/07/07 16:29

備考

トラッキング開始 **位置確認**

タイムスタンプ **DICOM**

19:01 4G

編集 **保存**

テナント
Free trial

患者ID
00003

性別 男性	年齢 65
体重 74	患者種類 転院搬送
NIHSS	救急種類 脳卒中

ABC病院 救急医療

発症時間
2021/07/07 16:29

備考
10年前PCI施工

19:01 4G

トーク ABC病院 救急医療 2メンバー

救急患者です。意識不明です。
左の麻痺があります。

既読 1 15:09

Dr. B

**マンパワー
ください**

15:12

症例が新規作成されました。患者 00003

テナント: Free trial
救急種類: 脳卒中
性別: 男性
年齢: 65
NIHSS: -

実施者: Dr.A

さらに表示

16:31

症例が更新されました。患者 00003

テナント: Free trial
NIHSS: -
備考: 10年前PCI施工

実施者: Dr.A

さらに表示

16:45

保存後、編集部分は自動的にグループチャットへ送信されます。




Next >

1 「プロトコル」をタップ

2 患者を選択

3 「プロトコルを選択」をタップ

4 該当するプロトコルをタップ

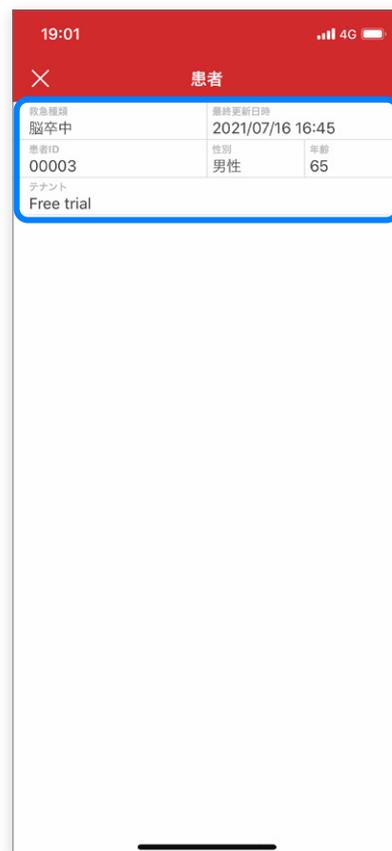

※「プロトコル」はグループチャットでのみ利用可能です。

※ダイレクトチャットには「プロトコル」ボタンは表示されません。




※患者の救急種類に対応したプロトコルが選択可能です。

※グループに登録、もしくは他グループから移動された患者のみが選択可能です。



待受画面の通知


チャットにイベント内容、患者 ID、日付時刻が貼り付けられます。同時に、同グループのメンバーに通知が届きます。

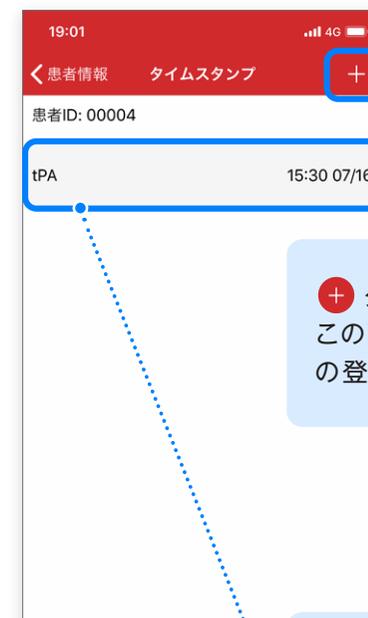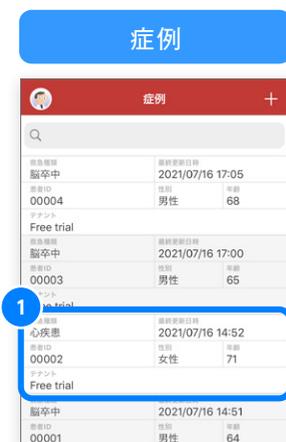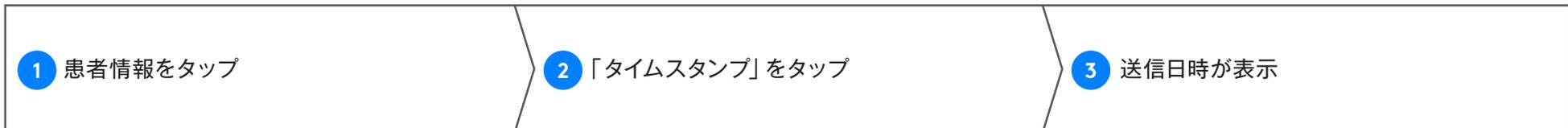

+ タップすることで、この画面からもプロトコルの登録が可能です。

チャットへ送信したプロトコルが患者ごとにタイムスタンプとして一覧表示されます。

ユーザーから通話開始

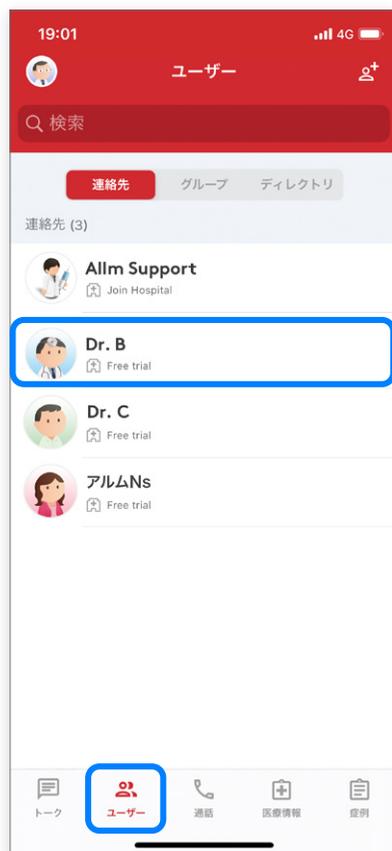


※ご利用には Join アプリのマイクおよびカメラの許可設定が必要です。
iOS の設定画面から Join アプリをタップし、マイクおよびカメラの許可設定を ON にしてください。

ダイレクトチャットから通話開始



1 「音声通話」か「ビデオ通話」をタップ

2 通話開始

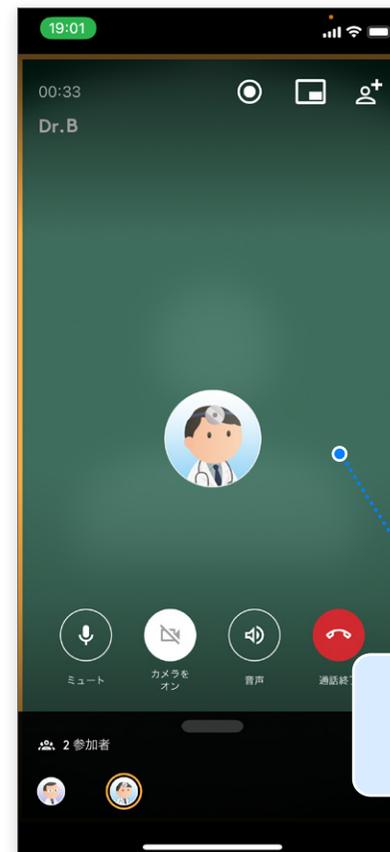

通話中の
表示画面

通話履歴から通話開始



※多人数通話履歴の場合は、音声通話 / ビデオ通話アイコンをタップ後に、メンバーを選択画面になります。





🗨️ 通話相手のダイレクトチャットに切替

通話を維持したまま、右下に通話画面が小さく表示されます。



通話を維持したまま画面切替

画面上でスワイプダウンすると右下に通話画面が小さく表示され、通話を維持したまま他の画面操作ができます。

音声通話中

19:01
📶 🔋

00:33
🔍 📺 👤+

Dr. B



🔇 ミュート
📷 カメラをオン
🔊 音声
📞 通話終了

👤 2 参加者


👤+ ユーザーの追加

🔇 マイク On/Off

📺 ビデオ通話に切り替え

🔊 スピーカー On/Off

ハンズフリーで通話できます。

📞 終話

通話を終了します。

通話に参加中のメンバーが表示されます



ビデオ通話中

カメラ切替

インカメラ/アウトカメラの切り替えができます。

通話相手のダイレクトチャットに切替

通話を維持したまま、右下に通話画面がv小さく表示されます。

通話を維持したまま画面切替

画面上でスワイプダウンすると右下に通話画面が小さく表示され、通話を維持したまま他の画面操作ができます。

通話に参加中のメンバーが表示されます

ユーザーの追加

自身のカメラ映像をホールド（押したまま）し、移動することが可能です。

マイク On/Off

ビデオ切り替え

音声通話に切り替えができます。

終話

通話を終了します。




スピーカー On/Off

ハンズフリーで通話できます。


既存グループから音声通話開始



所属しているグループの範囲内で、最大 **50**人までのグループ音声通話をすることができます。

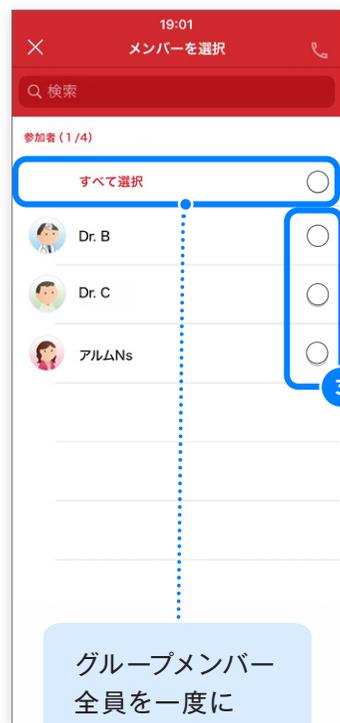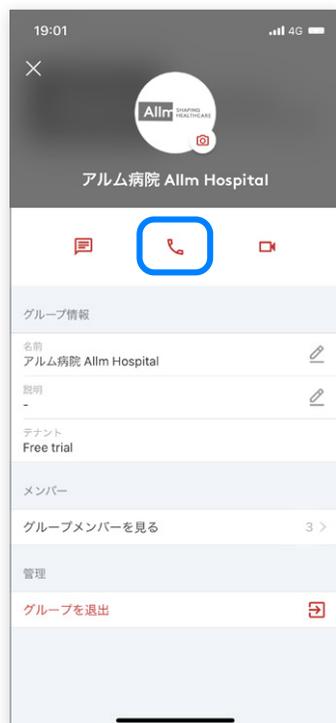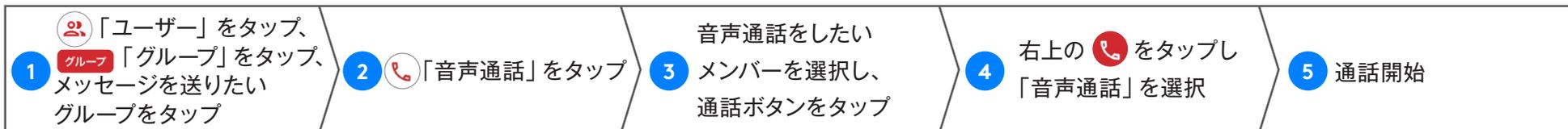



グループメンバー
全員を一度に
選択可能です。

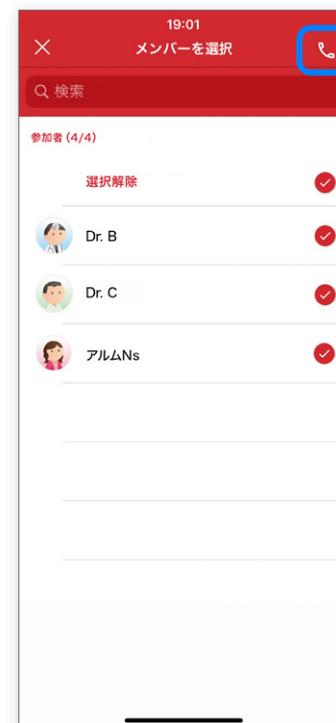

「通話」から音声通話開始




連絡先に登録されているユーザーを選択し、最大50人までのグループ音声通話をすることができます。

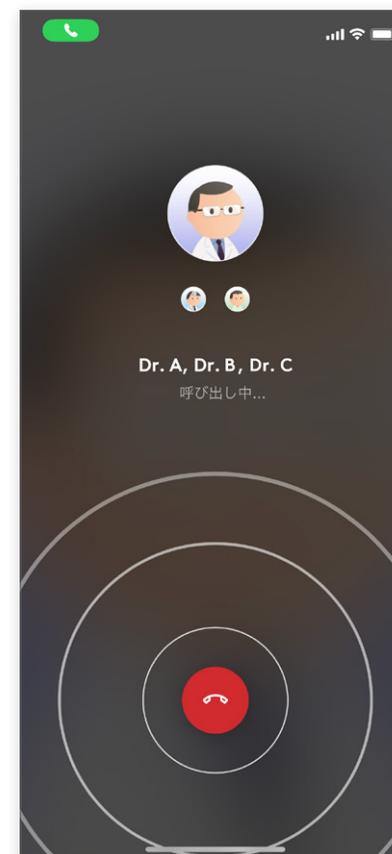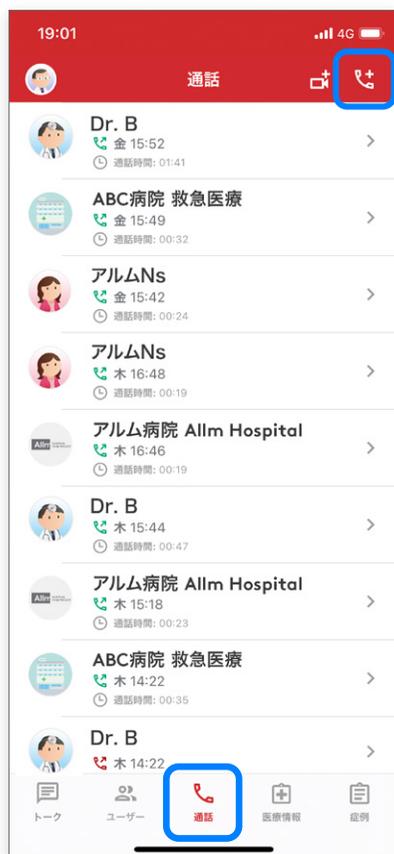




発信画面

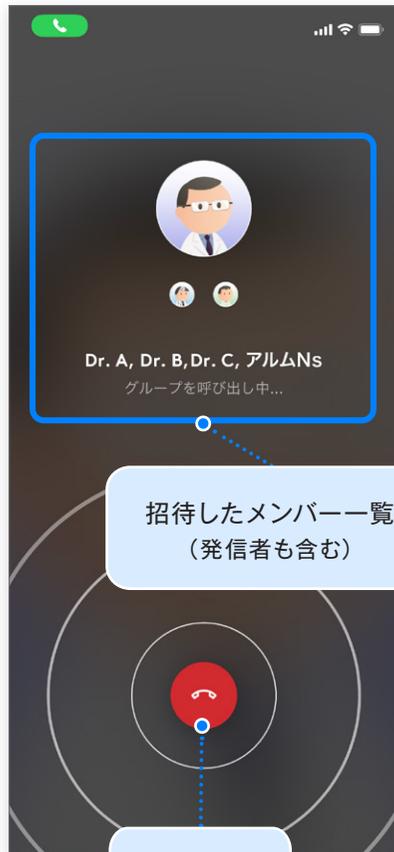


招待したメンバー一覧
(発信者も含む)

終話


開始 / 応答後画面

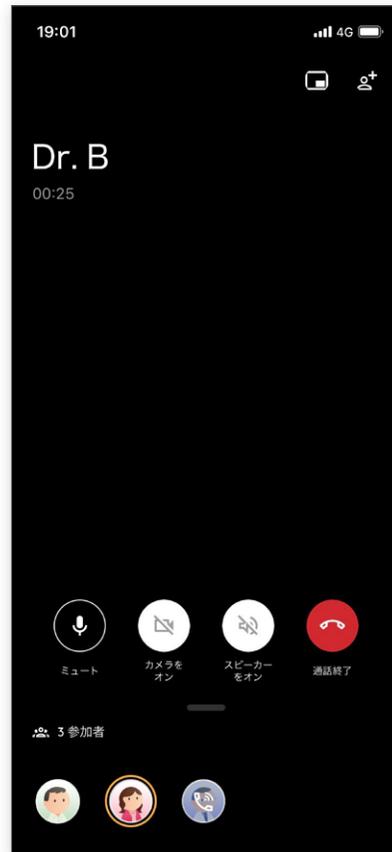

未応答者の確認

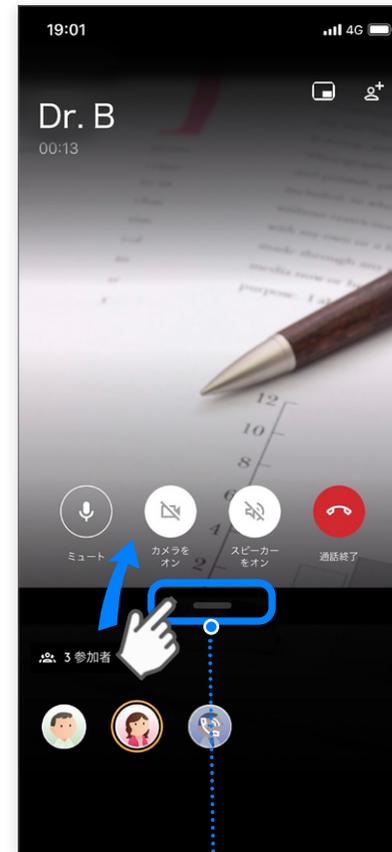

上にスワイプすることで、
参加メンバー一覧
より詳細に確認可能です。

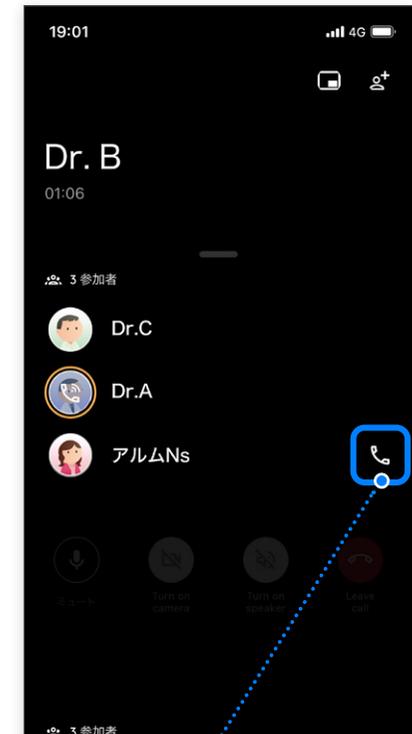

通話に出なかった場合、
途中退室した場合は
電話マークが表示されます。
再招待する場合は、
この電話マークをタップすると
再度参加リクエストが可能です。



音声通話中


📺 通話相手のダイレクトチャットに切替

通話を維持したまま、右下に通話画面が小さく表示されます。



📺 通話を維持したまま画面切替

画面上でスワイプダウンすると右下に通話画面が小さく表示され、通話を維持したまま他の画面操作ができます。

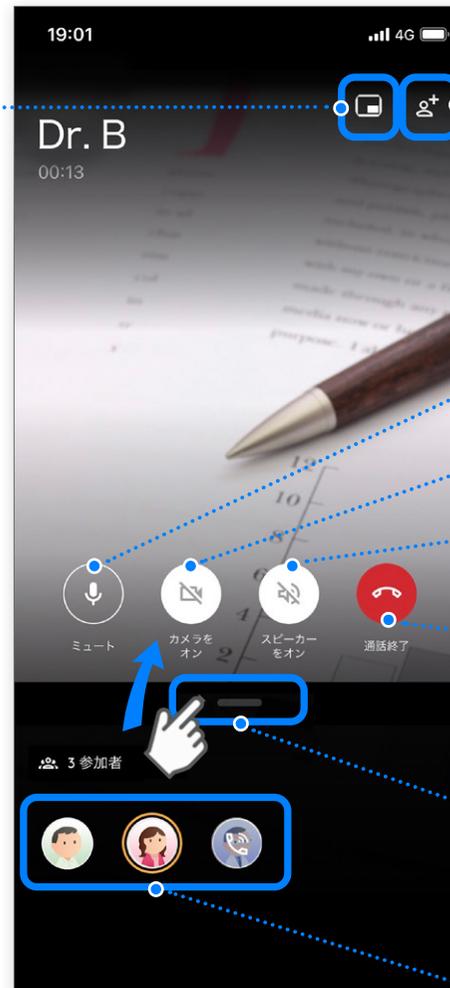

招待者追加ボタン

マイク On/Off

ビデオ通話に切り替え

スピーカー On/Off

ハンズフリーで通話できます。

終話

通話を終了します。





上にスワイプすることで、参加メンバー一覧をより詳細に確認可能です。

通話に参加中のメンバーが表示されます。

チャットグループからビデオ通話開始






所属しているグループの範囲内で、最大50人までのグループビデオ通話をすることができます。

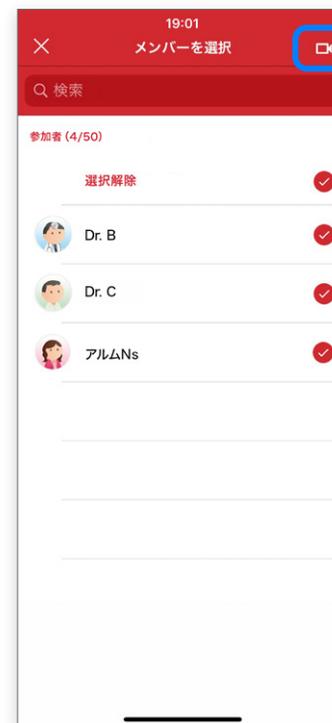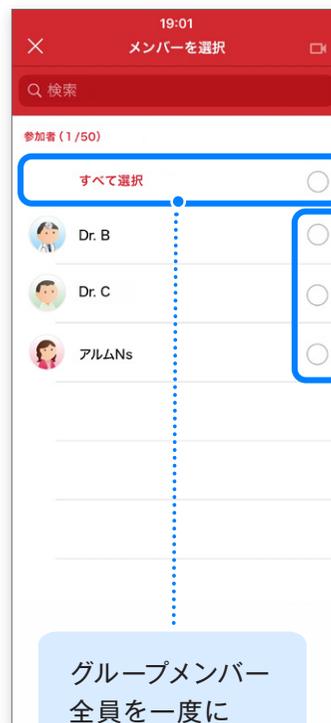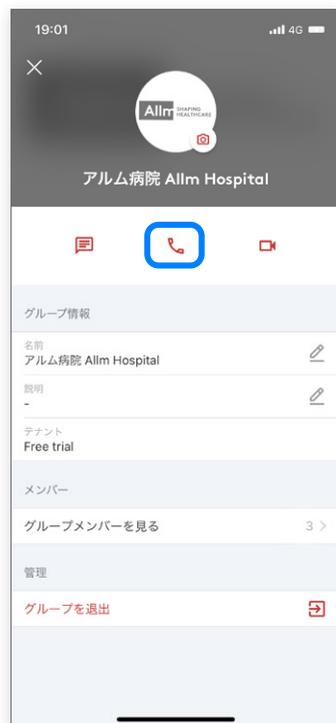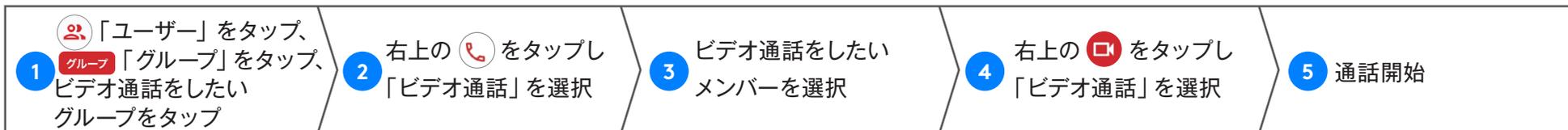

「通話」からビデオ通話開始



連絡先に登録されているユーザーを選択し、最大50人までのグループビデオ通話をすることができます。

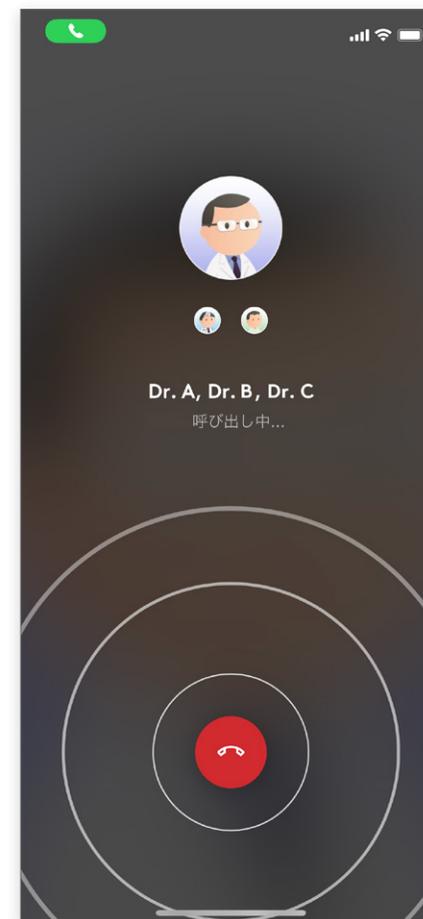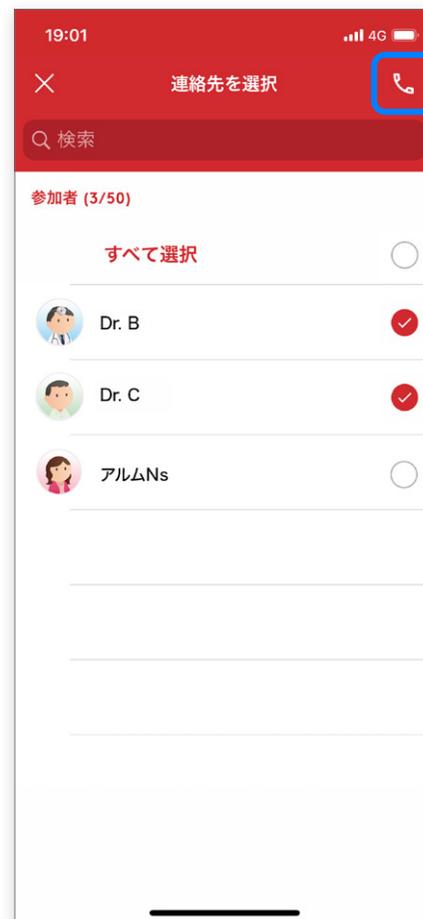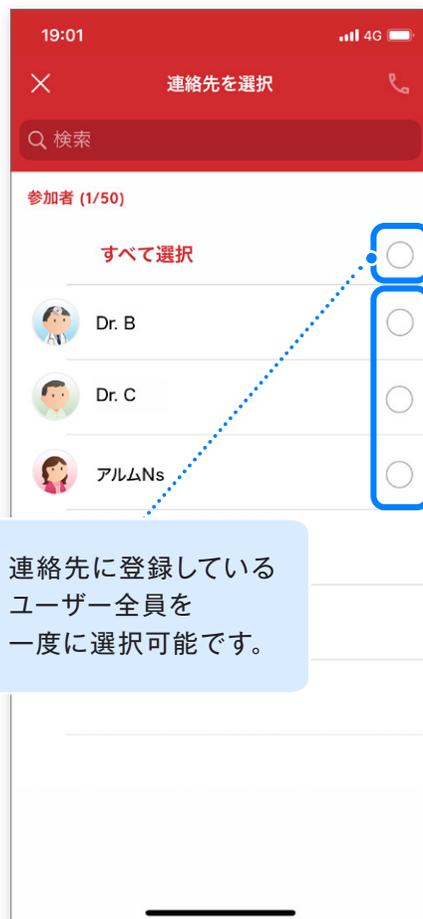



ビデオ通話中

📺 通話相手のダイレクトチャットに切替

通話を維持したまま、右下に通話画面が小さく表示されます。



通話を維持したまま画面切替

画面上でスワイプダウンすると右下に通話画面が小さく表示され、通話を維持したまま他の画面操作ができます。



📷 カメラ切替

インカメラ/アウトカメラの切り替えができます。

👤+ 招待者追加ボタン

自身のカメラ映像をホールド (押したまま) し、移動することが可能です。

上にスワイプすることで、参加メンバー一覧をより詳細に確認可能です。

通話に参加中のメンバーが表示されます。




JoinWeb 版からの画面共有

Web 版からの画面共有

グループ通話では、**JoinWeb** 版からの画面共有を確認できます。

※ **iOS、Android** 機器からの画面共有はできません。
画面の閲覧のみとなります。

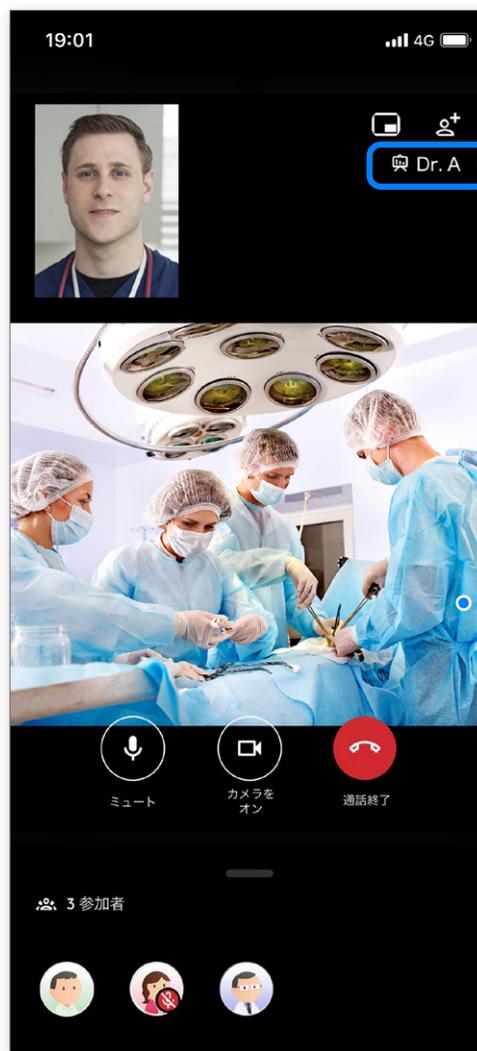




共有者名

JoinWeb 版を利用している参加者が画面共有を開始すると、共有内容が表示されます。


通話中のメンバー追加



音声/ビデオ通話開始後に、連絡先に登録されているメンバーを通話に追加することができます。

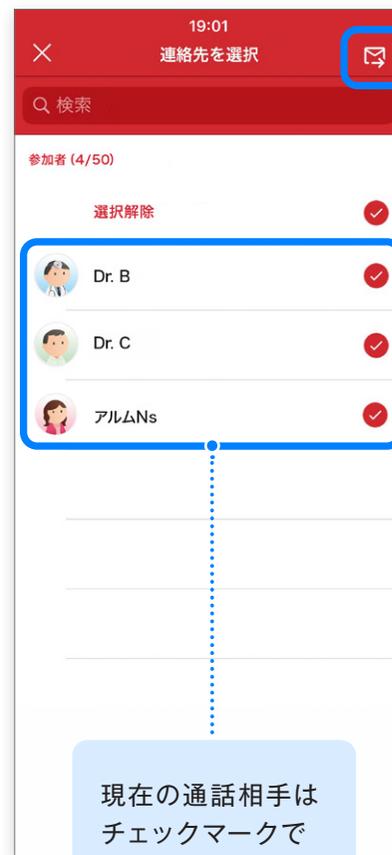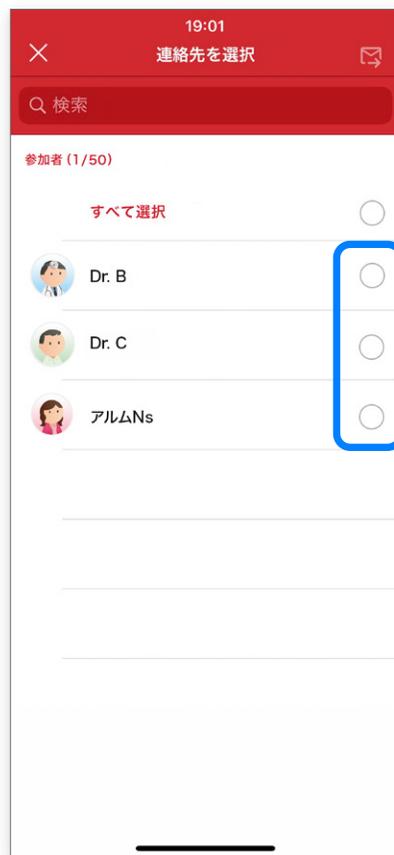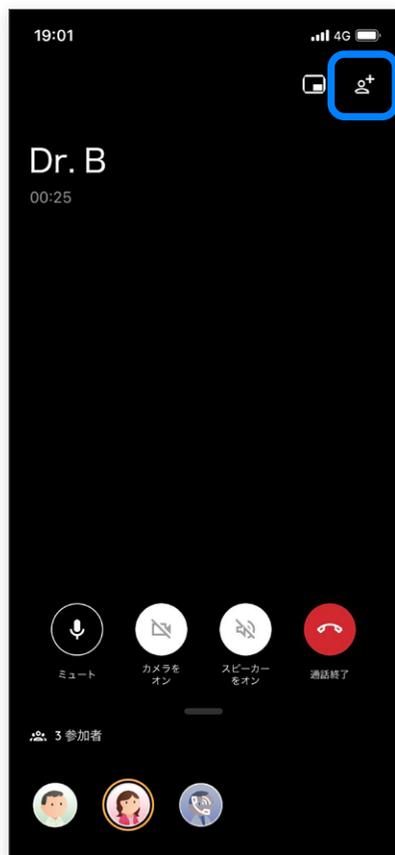




現在の通話相手は
チェックマークで
表示されます。

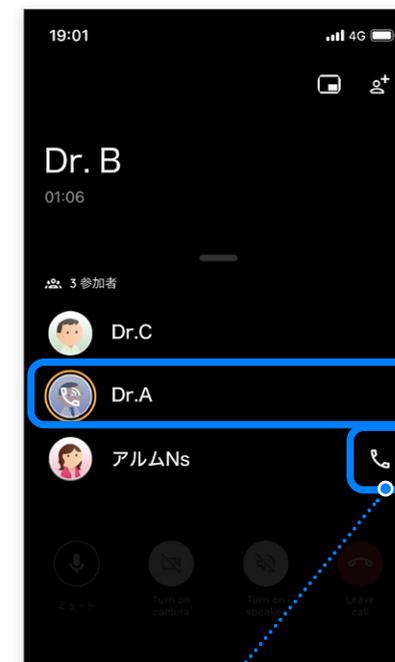


通話に出なかった場合、途中退室した場合は電話マークが表示されます。再招待する場合は、「通話招待ボタン」から再招待してください。



音声/ビデオ通話開始後に、開始時点で参加していない招待メンバーに対し、再度参加リクエストすることができます。

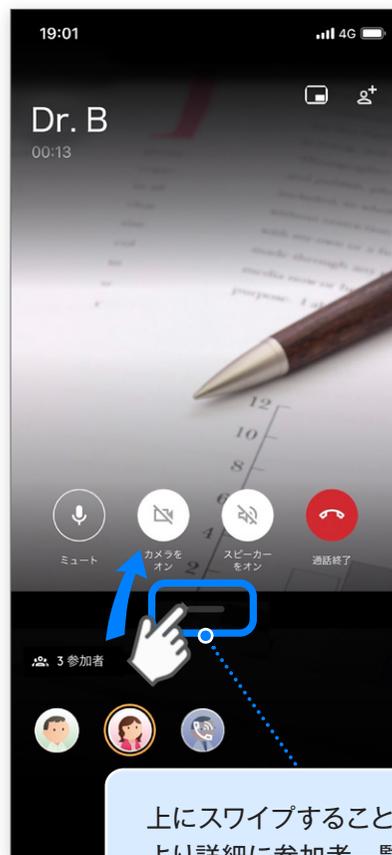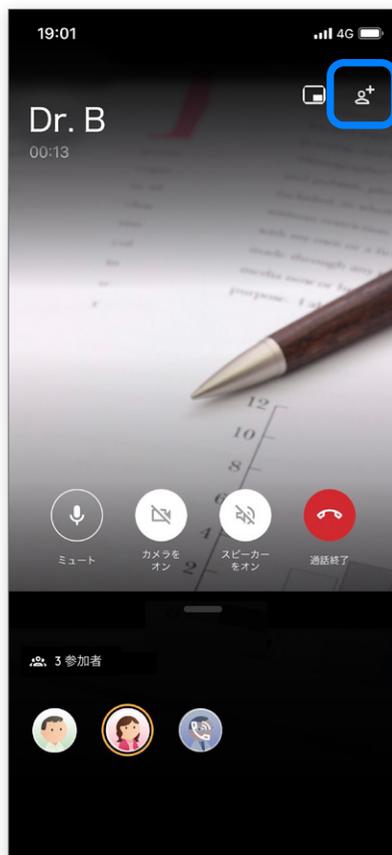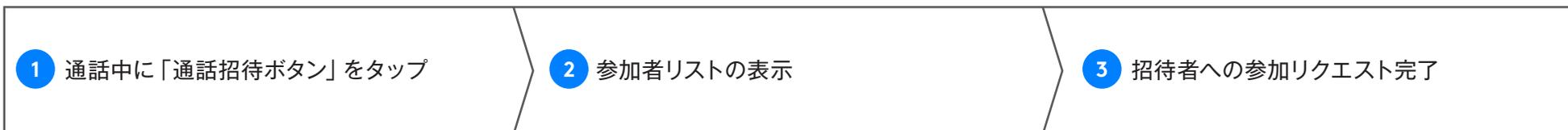

上にスワイプすることで、より詳細に参加者一覧を確認可能になります。

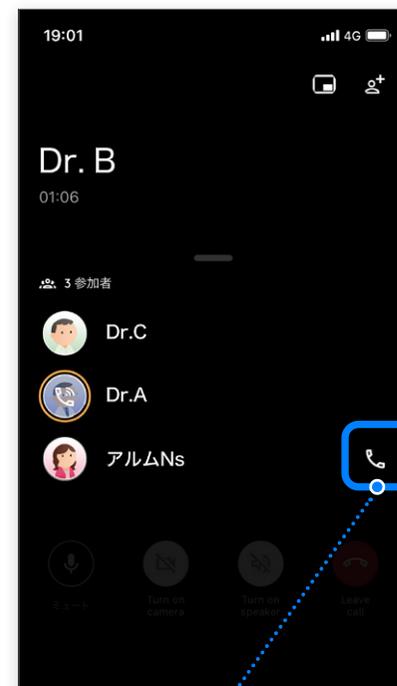

通話に出なかった場合、途中退室した場合は電話マークが表示されます。再招待する場合は、 「通話招待ボタン」から再招待してください。



グループ通話を開始する際は、チャットグループ画面から発信してください。

「通話」をタップして通話履歴を確認できます。

※現バージョンでは通話履歴からのグループ通話の発信ができません。
画面右上の通話アイコン、もしくはチャットグループ画面から発信してください。

通話の参加者や通話記録を確認できます。

※現バージョンでは通話履歴からのグループ通話の発信ができません。



1 ボタンをホールド (押したまま)

2 ホールドした状態で音声を入力

3 ボタンから指を離し、録音・送信完了



長押し



＼おはようございます！



録音した音声メッセージが
チャットに貼り付けられます。




1 録音中、間違えたら ...

2 ホールドした状態で
指を  ボタンの外へ動かす

3 指を離し、キャンセル完了



＼間違えた... /

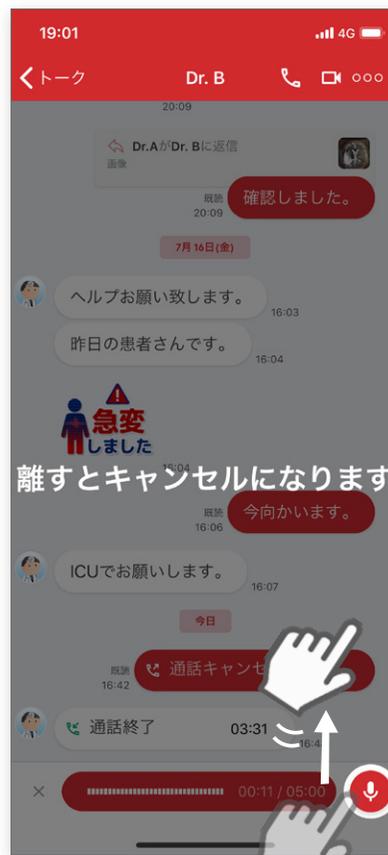

離すとキャンセルになります




録音が停止し、
音声は送信されません。





1 再生ボタンをタップ

2 一時停止ボタンをタップして停止

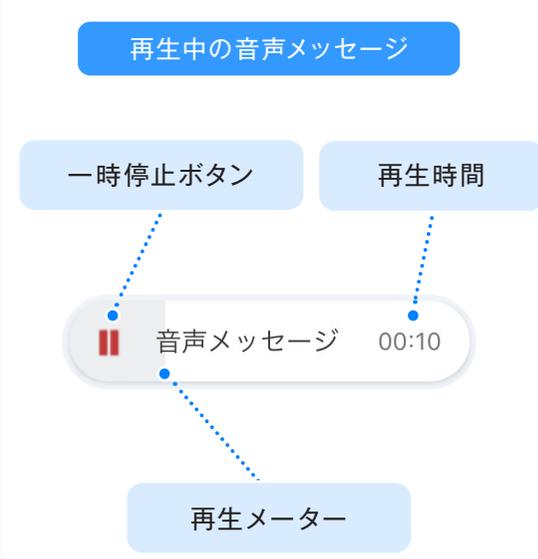



再生中は再生時間がカウントされ、グレー部分が左から右に伸びて、おおよその再生位置を示します。

写真を撮影して送信

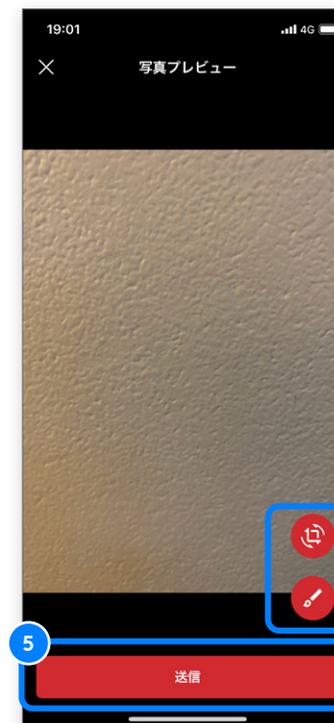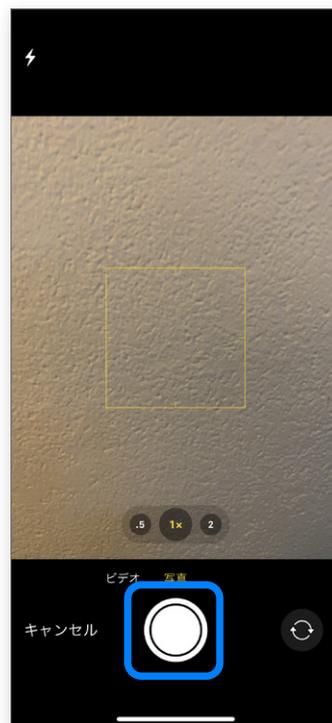

送信前に画像を編集する場合には、編集ボタンをタップ

撮影直後に編集 (トリミング・回転)

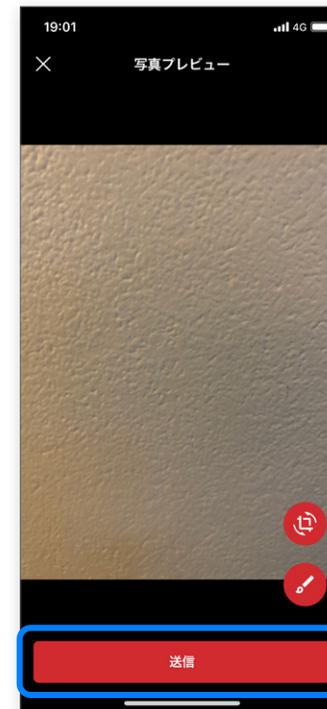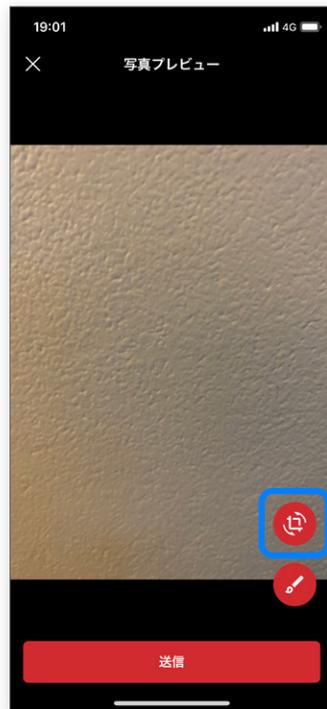

撮影直後に編集 (テキスト・ブラシ)



テキスト

テキスト入力後、画面をタップ

入力後、任意の場所に移動が可能です。

「保存」をタップ

ブラシ

色変更





太さ変更

「保存」をタップ

送信



自身が送信した写真、別ユーザーが送信した写真のどちらも編集可能です。

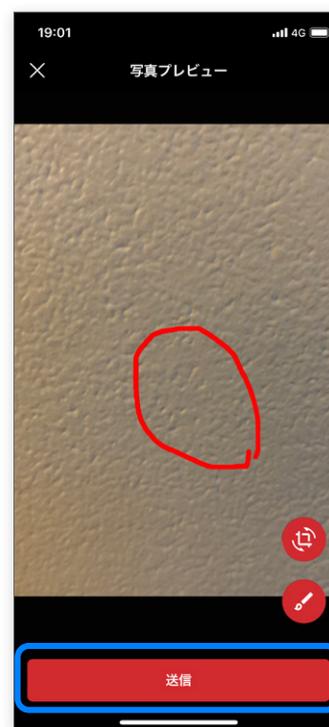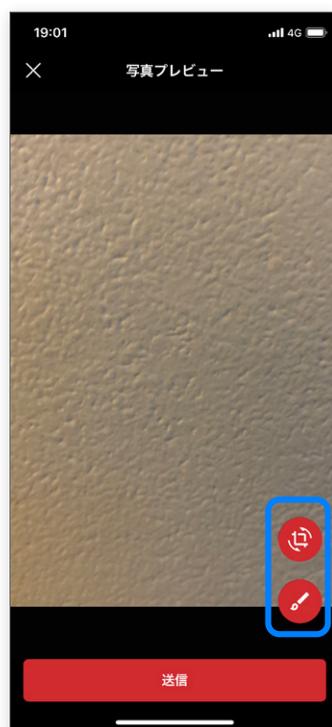
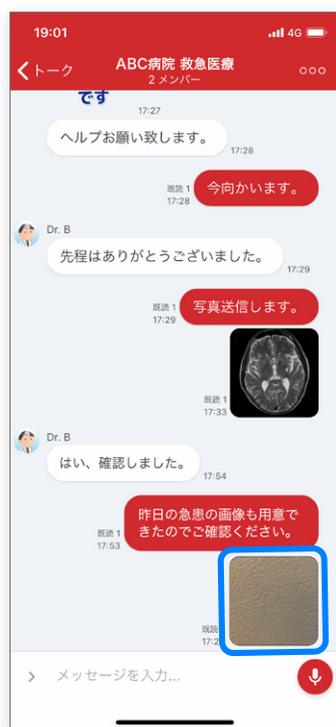
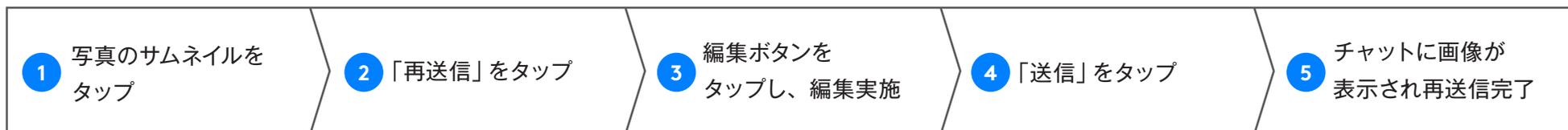


※編集方法は以下を参照してください。


[「撮影直後に編集（トリミング・回転）」](#)へ

[「撮影直後に編集（テキスト・ブラシ）」](#)へ

動画を撮影して送信

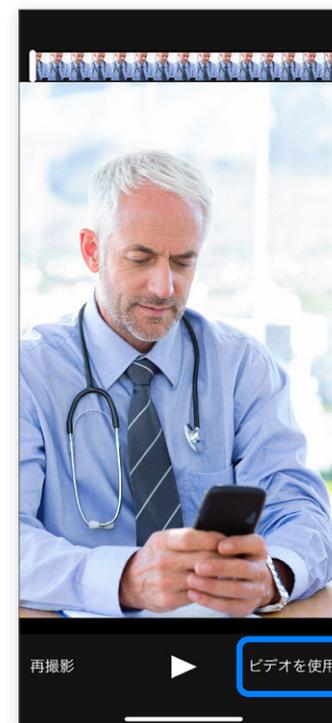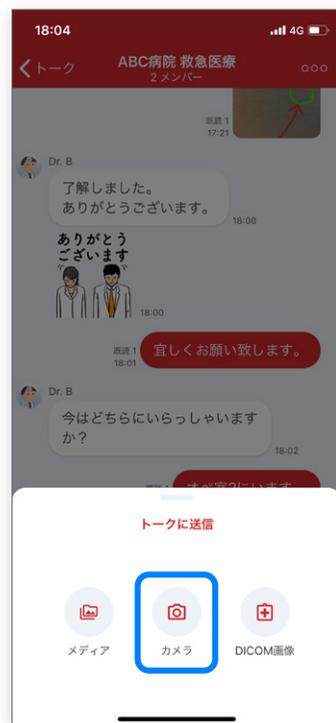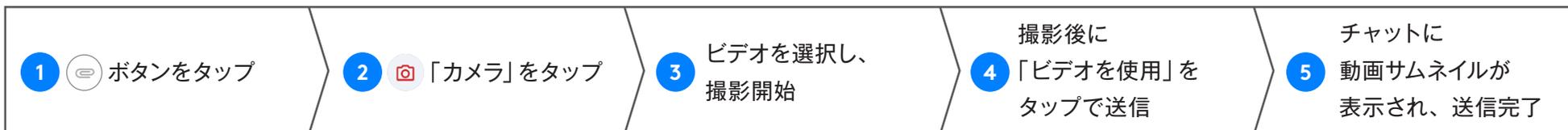

※ビデオは最大で5分間撮影できます。

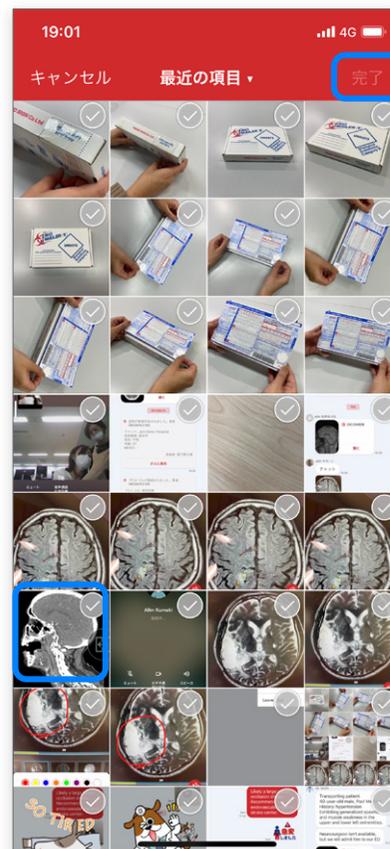


※写真 / 動画をタップすると拡大して確認ができます。
 ※写真 / 動画は最大で5つまで選択できます。
 ※動画は再生時間が5分以内のものが送信できます。

サムネイルが表示されます。
 タップすると写真の表示または
 動画の再生ができます。



1 左上のアイコンをタップ

2 「写真の送信品質」「ビデオの送信品質」を
タップし、送信品質を選択する

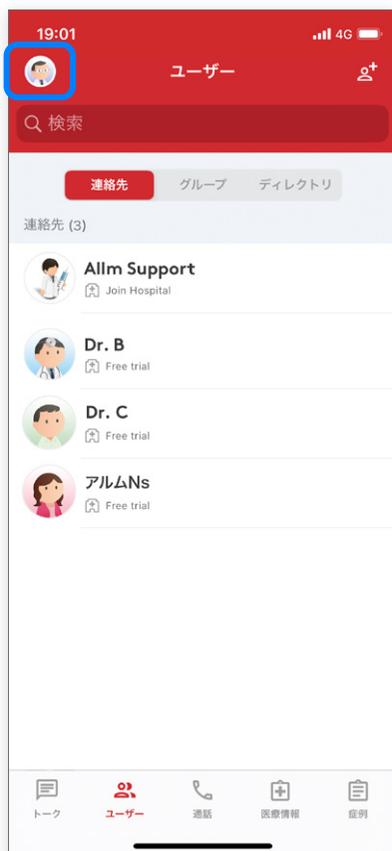

※ビデオの送信品質は、高・中・低の3つから選択可能です(デフォルトでは「中」に設定)。

※「高」の場合、HD画質となりますがデータ量が大きくなるため、送受信に時間がかかります。



ウェブで閲覧または他のアプリで受信した PDF ファイルを Join へ共有することができます。



ウェブブラウザ



他のアプリ




※ iOS11以降でご利用いただけます。
 ご利用になる場合は OS のアップデートをご検討ください。
 ※共有の可否については、共有元アプリの機能に準じます。






Join以外のアプリからも、JPEG、PNG、GIF形式の画像を共有することができます。

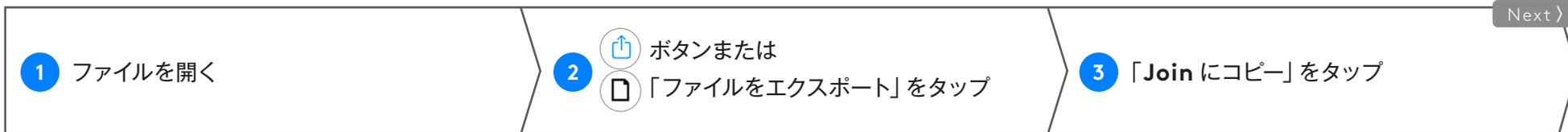


例)

メール

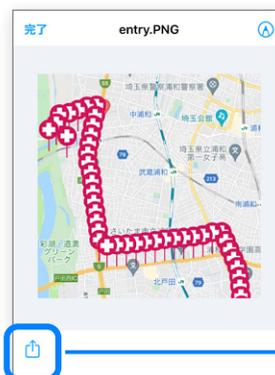

Dropbox

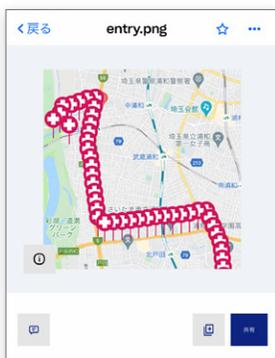

※共有する画像は全てJPEG形式に変換され、送信されます。
 GIF形式などアニメーションのあるものは、
 アニメーションがない状態で共有されます。
 ※共有の可否については、共有元アプリの機能に準じます。



4 ファイルを確認し「送信」をタップ

5 送信先を選択してタップ

6 チャットに画像が表示され送信完了

